

 ALL SPIRAL



eckermann
DENTAL IMPLANT SYSTEM

www.eckermann.es



ALL SPIRAL

L'IMPLANT DE CONNEXION EXTERNE DE ECKERMANN

All Spiral® est l'implant idéal pour les techniques chirurgicales uniques, même dans les zones de compromis esthétique. Ses résultats sont démontrés en cas de mise en charge immédiate, grâce à sa fixation primaire extraordinaire et à la fiabilité de la connexion prothétique Conelock

L'URGENCE

La conception de l'urgence consiste en une zone conique de 1,6 mm de hauteur où se produit l'effet de « soudage à froid ». L'élément carré confère au pilier prothétique un effet anti-rotation efficace. L'anneau poli facilite la mise en place et le maintien ultérieur des tissus mous péri-implantaires, constituant ainsi un espace biologique esthétique.

MICROSPIRES


La zone cervicale de l'implant a été conçue avec des micro-filetages qui offrent une répartition optimale des charges fonctionnelles afin de préserver au maximum l'os marginal et de stimuler la calcification à ce niveau.

SPIRES À COMPRESSION VARIABLE

Le macro design cortical de l'implant intègre des filetages à compression variable qui offrent des niveaux élevés de stabilité primaire. Ce profil de filetage, différent dans chaque section de l'implant, s'adapte à chaque zone de l'os en fonction de ses caractéristiques de densité, optimisant et améliorant sa capacité à supporter des charges.

APEX ARRONDI ATRAUMATIQUE

La forme sphérique de la zone apicale de l'implant protège les structures anatomiques des blessures.

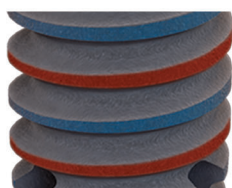

PROFIL À DOUBLE FILETAGE

Il facilite et raccourcit le temps d'insertion de l'implant, réduisant ainsi l'échauffement osseux.



ALVÉOLES HÉLICOÏDAUX

Ils facilitent la pose de l'implant et augmentent la quantité de tissu osseux en contact intime avec l'implant.




TRANSPORTEUR INCLUS

L'implant All Spiral® est présenté dans un double emballage stérile et inclut un transporteur


LA SUPERFICIE ECKCYTE®





All Spiral® est un implant de nouvelle génération en titane très pur, qui offre une micro et une nano rugosité, résultat des plus modernes traitements de gravure à l'acide, permettant l'obtention d'une surface de caractéristiques optimum de biocompatibilité avec les ostéocytes.

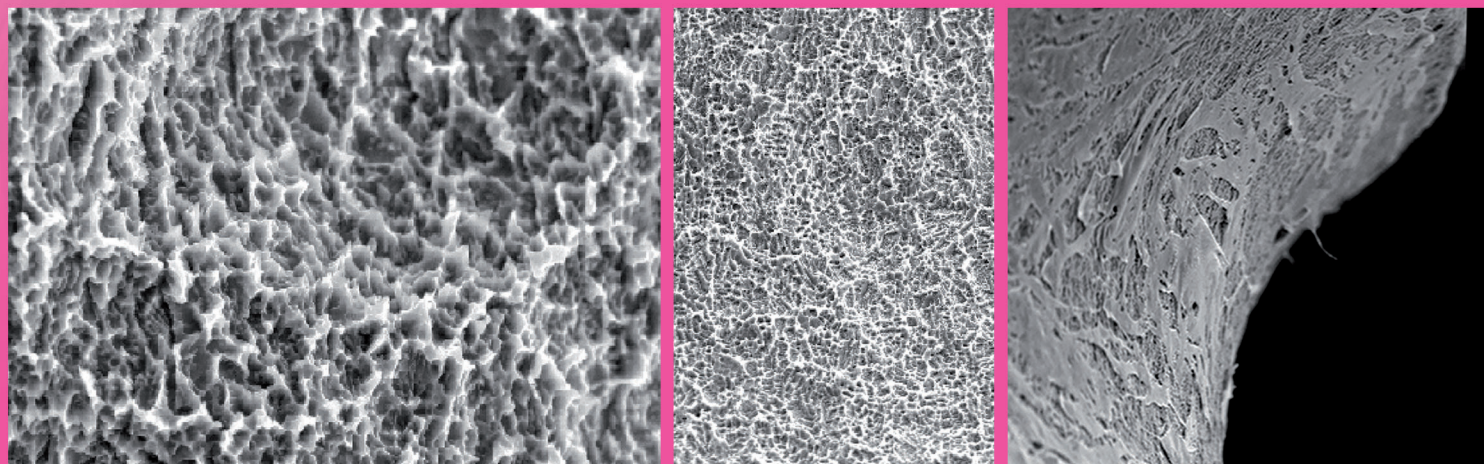

ECKCYTE® permet une augmentation de la surface en contact avec l'os offrant une matrice idéale grâce à sa surface rugueuse microporeuse et très homogène, ce qui est un facteur important pour la meilleure prolifération ostéoblastique de l'implant (*).

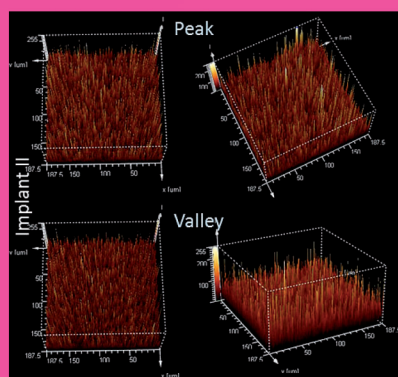

Le traitement de surface assure une protection efficace contre la corrosion et une grande stabilité, lui conférant également des propriétés hydrophiles qui accélèrent l'absorption des fluides sur toute la surface de l'implant, améliorant ainsi l'interaction entre le milieu biologique et l'implant et sa capacité d'ostéointégration. (*)

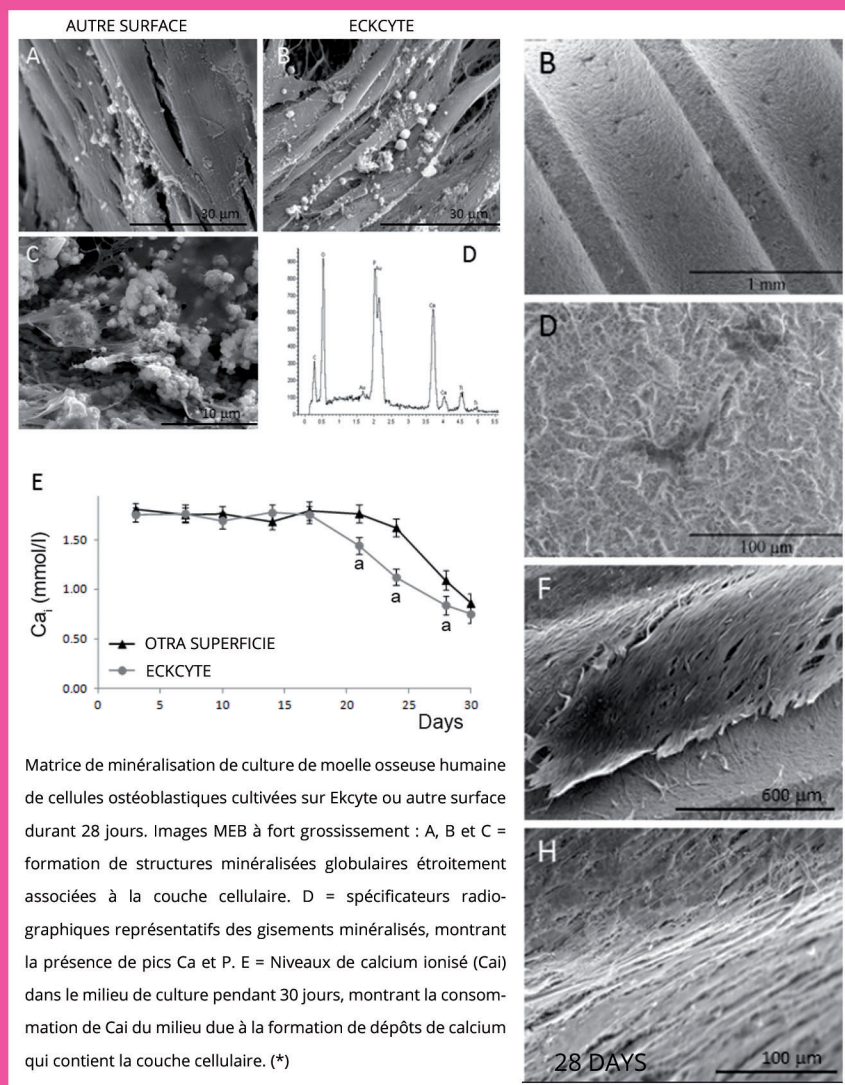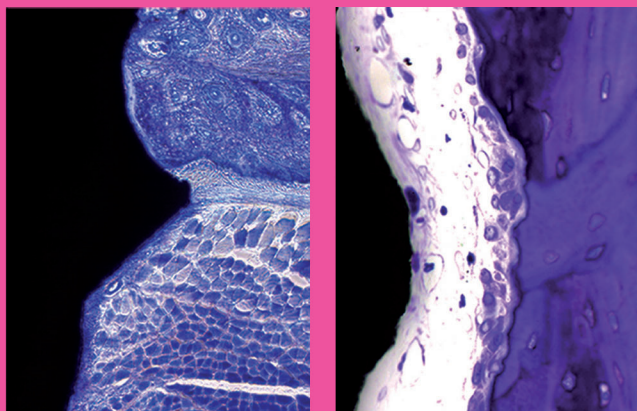

(*) Mesquita P, Gomes PD, Sampaio P, Juodzbalsys G, Afonso A, Fernandes MH. Surface Properties and Osteoblastic Cytocompatibility of Two Blasted and Acid-Etched Titanium Implant Systems with Distinct Microtopography. J Oral Maxillofac Res 2012 (Jan-Mar);3(1):e4 URL: <http://www.ejournals.org/JOMR/archives/2012/1/e4/v3n1e4ht.pdf> doi: 10.5037/jomr.2012.3104.

CONNEXION CONELOCK

Les implants All Spiral® incorporent la connexion exclusive CONELOCK de Eckermann, développée et testée au fil de 15 años. La connexion se caractérise par sa précision et sa stabilité, en combinaison avec les attachements et garantit le succès de toute solution prothétique avec une absence totale de micromouvements.



STABILITÉ, FIABILITÉ, ROBUSTESSE

La connexion exclusive CONELOCK est l'une de ses caractéristiques différentielles les plus remarquables et apporte une grande confiance dans la stabilité et le maintien à long terme des réhabilitations prothétiques sur ces implants.


Grâce à la précision de cette connexion, l'ensemble implant-pilier offre un comportement monobloc très robuste, comme si la connexion n'existait pas. En l'absence de micromouvement, l'union stable et fiable est assurée et la transmission des charges occlusales optimale. Par conséquent le comportement d'une dent naturelle est pratiquement reproduit.

SCELLAGE BACTÉRIOLOGIQUE

La connexion CONELOCK d'Eckermann offre un scellage mécanique totalement hermétique, offrant une parfaite étanchéité implant-pilier qui, agissant comme une barrière, empêche toute filtration de micro-organismes susceptible de provoquer une périimplantite, une prolifération bactérienne et des odeurs désagréables dans la bouche du patient.

Des études universitaires ont démontré l'étanchéité totale de cette connexion prothétique, qui garantit l'absence de filtrations bactériennes (**)

(**) Etude destinée à l'évaluation de la microfiltration et à l'ajustement dans un nouveau concept de connexion implantaire. / Réf AB-15-DO-06. Dra. Mireia Pato; Dr. Lluís Giner; Dr. Oscar Figueras. Université internationale de Catalogne.

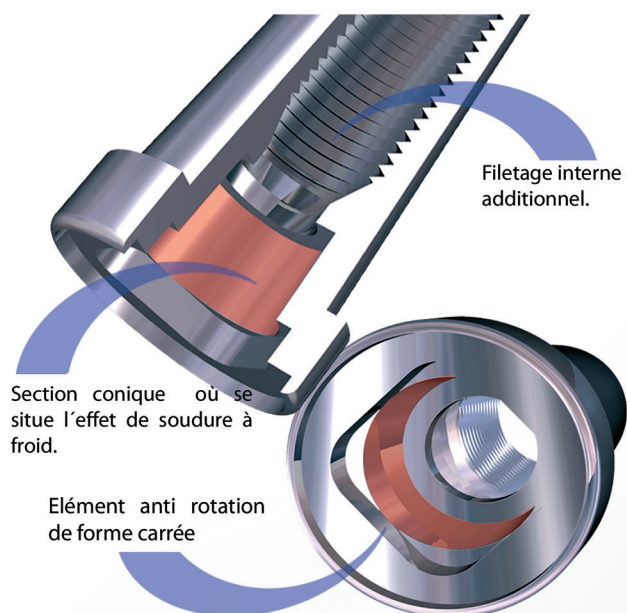

REVERSIBILITÉ

CONELOCK® offre une parfaite fixation implant-pilier avec un comportement monobloc fiable et durable, tout en permettant de retirer la prothèse, si nécessaire, sans complication, grâce à la conception de sa géométrie. Cela ouvre une nouvelle porte aux solutions prothétiques, en plus d'un considérable gain de temps et d'argent.

LA SOLUTION DÉFINITIVE AU PROBLÈME DU DESSERRAGE DES VIS DE CONNEXION PROTHÉTIQUE.

La force de la connexion CONELOCK réside dans la parfaite connexion implant-pilier au niveau de la section conique, par conséquent, le problème du desserrage des vis de connexion est résolu. Le problème disparaît car les vis ne sont plus nécessaires. Elles deviennent un élément optionnel, pour certaines applications.



ALL SPIRAL



ALL SPIRAL

CRUCETA
HEXAGONAL 1,25

IMPLANTES

ALL SPIRAL®

€ 0051

REF.	REF.
8,0mm	ISTV 233008
10,0mm	ISTV 233010
11,5mm	ISTV 233011
13,0mm	ISTV 233013
15,0mm	ISTV 233015
REF.	REF.
8,0mm	ISTV 233508
10,0mm	ISTV 233510
11,5mm	ISTV 233511
13,0mm	ISTV 233513
15,0mm	ISTV 233515
REF.	REF.
8,0mm	ISTV 234008
10,0mm	ISTV 234010
11,5mm	ISTV 234011
13,0mm	ISTV 234013
15,0mm	ISTV 234015
REF.	REF.
8,0mm	ISTV 234508
10,0mm	ISTV 234510
11,5mm	ISTV 234511
13,0mm	ISTV 234513
15,0mm	ISTV 234515
REF.	REF.
8,0mm	ISTV 235008
10,0mm	ISTV 235010
11,5mm	ISTV 235011
13,0mm	ISTV 235013
15,0mm	ISTV 235015

Topes de fresado

€

REF.	REF.
8,0mm	T1 L6
10,0mm	T1 L8
11,5mm	T1 L10
13,0mm	T1 L11
15,0mm	T1 L13
REF.	REF.
8,0mm	T2 L6
10,0mm	T2 L8
11,5mm	T2 L10
13,0mm	T2 L11
15,0mm	T2 L13
REF.	REF.
8,0mm	T3 L6
10,0mm	T3 L8
11,5mm	T3 L10
13,0mm	T3 L11
15,0mm	T3 L13

Prolongador de fresa

€

REF.	REF.
EX 650	

Paralelizador

€

REF.	REF.
PL 15	

Iniciador de rosca

€

REF.	REF.
MRS 3010 K	
MRS 3510 K	
MRS 4010 K	
MRS 4510 K	
MRS 5010 K	

Llave rosca implantes universal

€

REF.	REF.
LCT IH	

Para carraca

REF.

LHT 17	
LHT 23	

Llave extractora pilares universal

€

REF.	REF.
LEP IKT 25	

Carraca

€

REF.	REF.
CR	

Carraca dinamométrica

€

REF.	REF.
35 Nw CRT 35	

Destornillador

€

REF.	REF.
DH 17	
DH 23	
DC 17	
DC 23	

Llave portamechas universal

€

REF.	REF.
LMU	

Mecha destornillador

€

REF.	REF.
MHT	
MC 18	

Instrumento portamechas

€

REF.	REF.
DM	

CONFORMACIÓN DE TEJIDOS

Tornillo de cierre

€ 0051

REF.	REF.
TC 1808	
TCX 18	

Tornillo de cierre corto

€ 0051

REF.	REF.
TC 1808 C	

Moldeador de cierre + tornillo

€ 0051

REF.	REF.
MGX	

Moldeador gingival circular

€ 0051

REF.	REF.
MG 2350 C	
MG 2355 C	
MG 2365 C	
MG 2370 C	

TOMA DE IMPRESIÓN

Tránsfer impresión directa

€

REF.	REF.
TR 2350 P	

Tornillo impresión directa

€

REF.	REF.
TFX 1851	

Tránsfer impresión indirecta

€

REF.	REF.
TR 2350 A	

Tornillo impresión indirecta

€

REF.	REF.
TFX 1825	
TFX 1813 L	

Réplica de implante

€

REF.	REF.
RP 23	

PRÓTESIS

Pilar calcinable

€

REF.	REF.
CA 2355 A	
CIRCULAR CA 2355 C	

Calcinable sobre pilar mecanizado

€

REF.	REF.
CA PM 40	
CA PM 40 A	
CA PM 50	
CA PM	

Asiento calcinable

€

REF.	REF.
AC	

Tornillo protésico guía

€

REF.	REF.
TGX 18	

Tornillo occlusal

€ 0051

REF.	REF.
THX 1810	
TH 1810	
THX 1813	
TH 1813	
THX 1821	
TH 1821	
THX 1851	
TH 1851	

Tornillo de asiento

€ 0051

REF.	REF.
TAX 18	
TA 18	

Asiento metálico

€ 0051

REF.	REF.
AM	

Cofia metálica sobre pilar

€ 0051

REF.	REF.
CM PM 40	
CM PM 50	
CM PM	

Pilar mecanizado con hombro

€ 0051

REF.	REF.
PM 235040 CH	
PM 235041 CH	
PM 235050 CH	
PM 235060 CH	
PM 235070 CH	
PM 235080 CH	
PM 235090 CH	

€ 0051

REF.	REF.
PM 235560 CH	
PM 235570 CH	
PM 235580 CH	
PM 235590 CH	

€ 0051

REF.	REF.
PM 236560 CH	
PM 236570 CH	
PM 236580 CH	
PM 236590 CH	

€ 0051

REF.	REF.
PM 237060 CH	
PM 237070 CH	
PM 237080 CH	
PM 237090 CH	

Pilar mecanizado sin hombro

€ 0051

REF.	REF.
PM 235060 A	
PM 235070 A	
PM 235080 A	
PM 235090 A	

€ 0051

REF.	REF.
PM 235560 A	
PM 235570 A	
PM 235580 A	
PM 235590 A	

€ 0051

REF.	REF.
PM 236560 A	
PM 236570 A	
PM 236580 A	
PM 236590 A	

€ 0051

REF.	REF.
PM 237060 A	
PM 237070 A	
PM 237080 A	
PM 237090 A	

Pilar angulado 15° + tornillo

€ 0051

REF.	REF.
PM A 15	
PMX A 15	
PM A 15 B	
PMX A 15 B	

Pilar mecanizado PEEK

€ 0051

REF.	REF.
PM P IST	

€ 0051

REF.	REF.
PM 2338	
PM 2351	

Asiento pilar bola

€ 0051

REF.	REF.
MG PB	

Casquillos BREDENT pilar bola

€

REF.	REF.
EX 361	
EX 361	
EX 361	
EX 361	

Pilar LOCATOR®

€ 0051

REF.	REF.
PLS 50	
PLS 65	

Pack de proceso LOCATOR®

€ 0051

REF.	REF.
EX 8519	

Botón nylon LOCATOR®

€ 0051

REF.	REF.
EX 8524-2	
EX 8527-2	
EX 8529-2	
EX 8547-2	

Herramienta básica LOCATOR®

€

REF.	REF.
EX 8393	

Tránsfer LOCATOR®

€

REF.	REF.
EX 8505	

Réplica LOCATOR®

€

REF.	REF.
EX 8530	

Pilar sobrecolable TILITE®

€

REF.	REF.
PS IS A	
PS IS C	

Pilar dinámico TILITE®

€

REF.	REF.
PSD IS 28	

Tornillo pilar dinámico TILITE®

€

REF.	REF.
TPSD IS 28	

Mecha destornillador

€

REF.	REF.
MTPSD IS 28	

PRÓTESIS EASY LINK®

Consultar catálogo Easy Link





ATENCIÓN AL CLIENTE

atencionalcliente@eckermann.es

+34 965 306 464

www.eckermann.es

C./ IRLANDA,2 03160 Almoradí - ALICANTE - ESPAÑA

