




TRIPLO NARROW

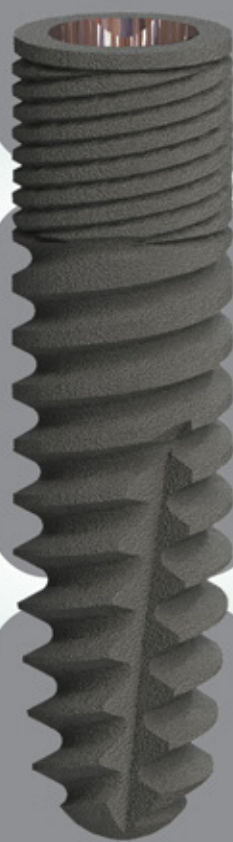

eckermann
DENTAL IMPLANT SYSTEM

www.eckermann.es

TRIPLO NARROW

L'IMPLANT AMINCI À CONNEXION INTERNE DE ECKERMANN

Un implant qui prend en compte les exigences actuelles : une conception robuste, moderne et facile à poser, indiquée pour les espaces réduits où il n'est pas possible de placer des implants de diamètres conventionnels.

Le Triplo Narrow, de diamètre réduit de 3,5 mm vous permet de traiter de manière sûre et prévisible les situations dans lesquelles les implants de diamètre traditionnel pourraient augmenter le risque clinique, même avec une quantité minimale de tissu dur et un espace limité. Tout cela sans sacrifier la sécurité, la stabilité et la simplicité apportée par les implants Triplo de Eckermann.

MICROSPIRES



La zone cervicale de l'implant a été conçue avec des micro-filetages qui assurent une répartition optimale des charges fonctionnelles pour préserver au maximum l'os marginal que possible et stimuler la calcification à ce niveau.

SPIRES À COMPRESSION VARIABLE

Le macro design cortical de l'implant intègre des filetages à compression variable qui offrent des niveaux élevés de stabilité primaire. Ce profil de filetage, différent dans chaque section de l'implant, s'adapte à chaque zone de l'os en fonction de ses caractéristiques de densité, optimisant et améliorant sa capacité à supporter des charges.

APEX SPHÉRIQUE ATRAUMATIQUE

La forme sphérique de la zone apicale de l'implant protège les structures anatomiques des blessures.

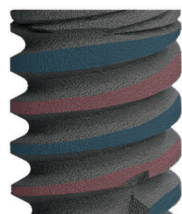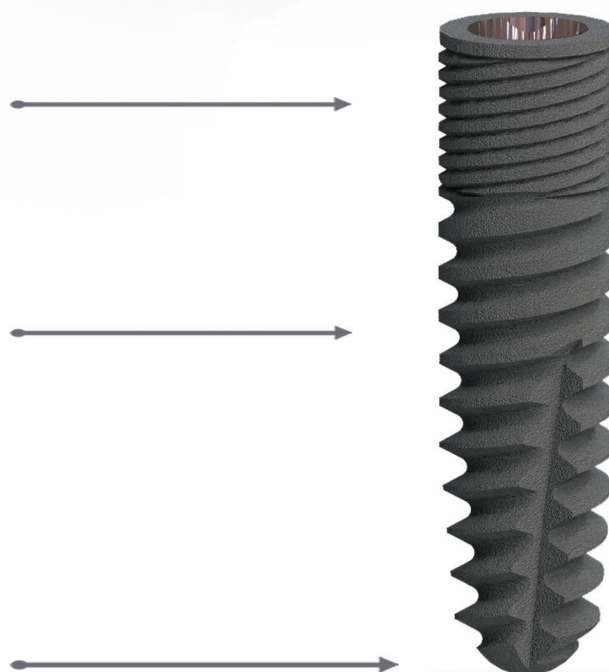

PROFIL À DOUBLE FILETAGE

Il facilite et raccourcit le temps d'insertion de l'implant, réduisant ainsi l'échauffement osseux.



ALVÉOLES HÉLICOÏDAUX

Ils facilitent la pose de l'implant et augmentent la quantité de tissu osseux en contact intime avec l'implant.




TRANSPORTEUR ET VIS CHIRURGICALE DE FERMETURE INCLUS

L'implant Triplo Narrow est conditionné sous double emballage stérile et inclut un transporteur et une vis de fermeture.


SUPERFICIE ECKCYTE®





Triplo® Narrow est un implant de nouvelle génération en titane très pur, qui offre une micro et une nano rugosité, résultat des plus modernes traitements de gravure à l'acide, permettant l'obtention d'une surface de caractéristiques optimum de biocompatibilité avec les ostéocytes.

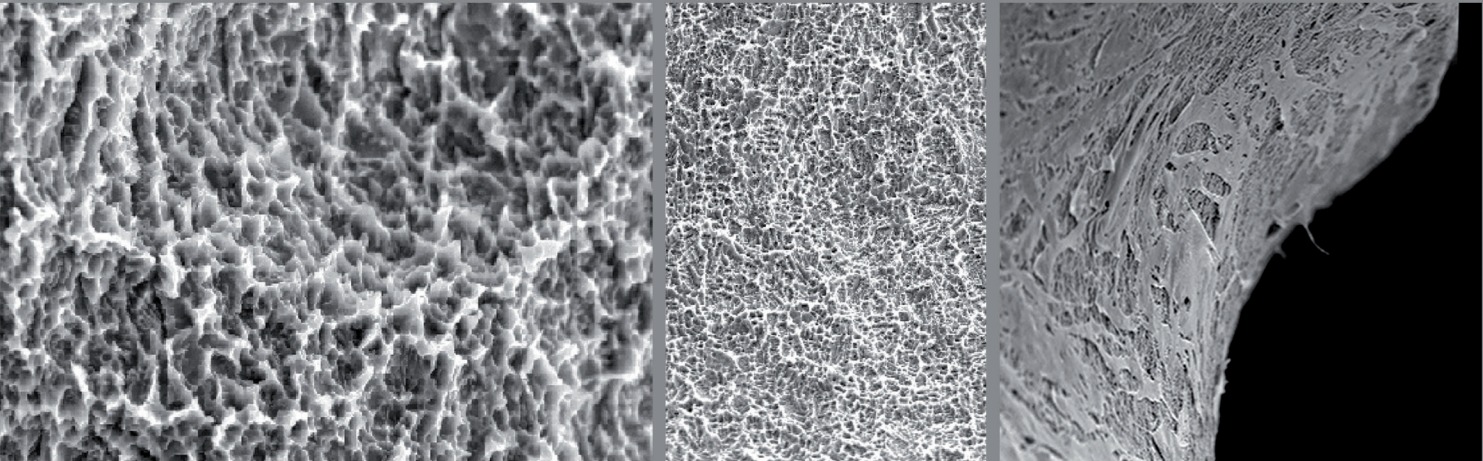

ECKCYTE® Fournit une augmentation de la surface en contact avec l'os, offrant une matrice idéale grâce à sa surface rugueuse très homogène et microporeuse, facteur important pour une meilleure prolifération ostéoblastique et ostéointégration de l'implant. (*)

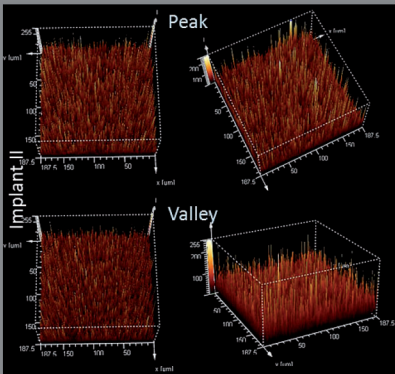

Le traitement de surface assure une protection efficace contre la corrosion et une grande stabilité, lui conférant également des propriétés hydrophiles qui accélèrent l'absorption des fluides sur toute la surface de l'implant, améliorant ainsi l'interaction entre le milieu biologique et l'implant et sa capacité d'ostéointégration. (*)

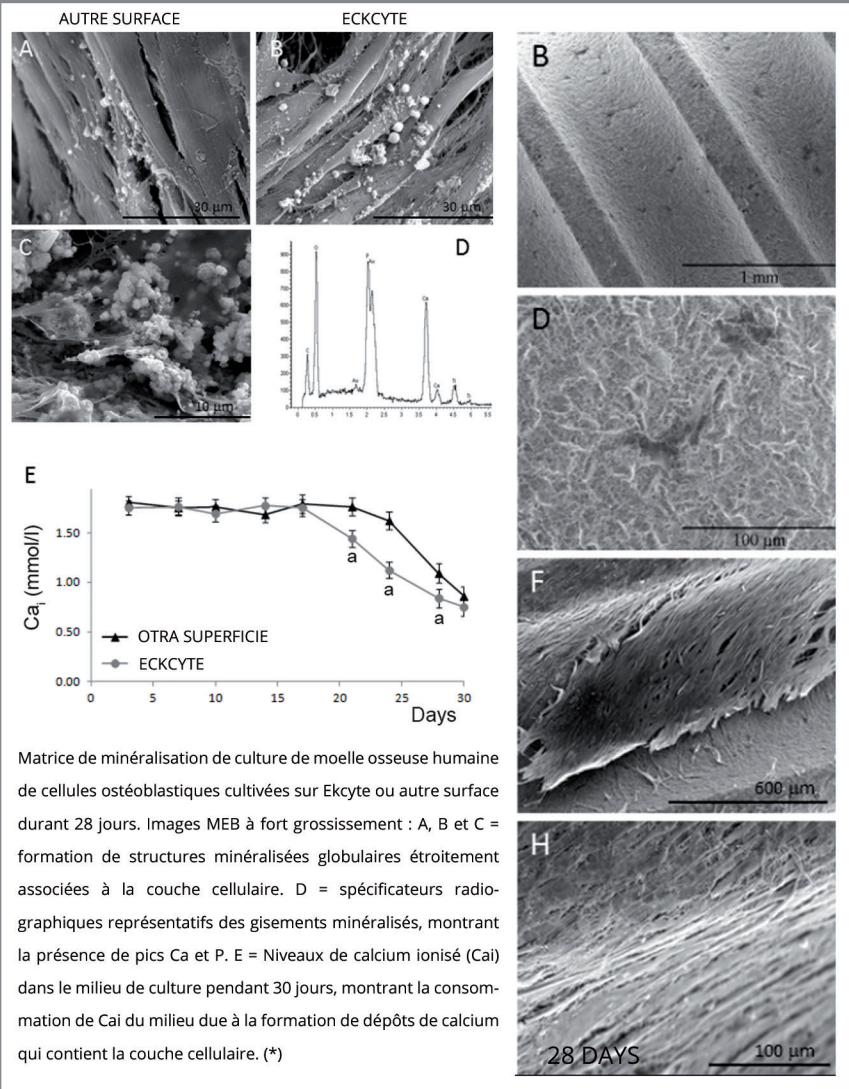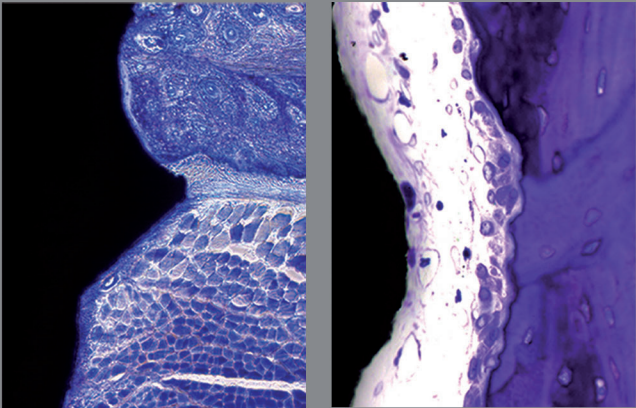

(*) Mesquita P, Gomes PD, Sampaio P, Juodzbalsys G, Afonso A, Fernandes MH. Surface Properties and Osteoblastic Cytocompatibility of Two Blasted and Acid-Etched Titanium Implant Systems with Distinct Microtopography. J Oral Maxillofac Res 2012 (Jan-Mar);3(1):e4 URL: <http://www.ejor.org/JOMR/archives/2012/1/e4/v3n1e4ht.pdf> doi: 10.5037/jomr.2012.3104.

LA CONEXIÓN CONELOCK


Les implants Triplo® Narrow incorporent la connexion exclusive CONELOCK de Eckermann, développée et testée depuis plus de 15 ans. La connexion se caractérise par sa précision et sa stabilité, en combinaison avec les attachements et garantit le succès de toute solution prothétique avec une absence totale de micromouvement.



STABILITÉ, FIABILITÉ, ROBUSTESSE

La connexion exclusive CONELOCK est l'une de ses caractéristiques différentielles les plus remarquables et apporte une grande confiance dans la stabilité et le maintien à long terme des réhabilitations prothétiques sur ces implants.

Grâce à la précision de cette connexion, l'ensemble implant-pilier offre un comportement monobloc très robuste, comme si la connexion n'existait pas. En l'absence de micromouvement, l'union stable et fiable est assurée et la transmission des charges occlusales optimale. Par conséquent le comportement d'une dent naturelle est pratiquement reproduit.

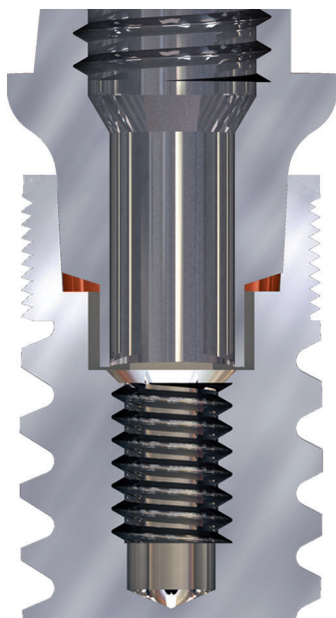

SCELLAGE BACTÉRIOLOGIQUE

La connexion CONELOCK® d'Eckermann offre un scellage mécanique totalement hermétique, offrant une parfaite étanchéité implant-pilier qui, agissant comme une barrière, empêche toute filtration de micro-organismes susceptible de provoquer une périimplantite, une prolifération bactérienne et des odeurs désagréables dans la bouche du patient.

Des études universitaires ont démontré l'étanchéité totale de cette connexion prothétique, qui garantit l'absence de filtrations bactériennes.^(**)



^(**) Etude destinée à l'évaluation de la microfiltration et à l'ajustement dans un nouveau concept de connexion implantaire. / Réf AB-15-DO-06. Dra. Mireia Pato; Dr. Lluís Giner; Dr. Oscar Figueras. Université Internationale de Catalogne.

REVERSIBILITÉ

CONELOCK® offre une parfaite fixation implant-pilier avec un comportement monobloc fiable et durable, tout en permettant de retirer la prothèse, si nécessaire, sans complication, grâce à la conception de sa géométrie. Cela ouvre une nouvelle porte aux solutions prothétiques, en plus d'un considérable gain de temps et d'argent.



PERMET TOUTES LES SOLUTIONS PROTHÉTIQUES, MÊME DANS DES SITUATIONS D'ESPACE LIMITÉ

Triplo Narrow dispose d'une large gamme d'attachements prothétiques qui permettent la réalisation de toutes sortes de réhabilitations, s'adaptant aux différentes caractéristiques de chacun des cas, et offrant les solutions les plus modernes et originales quant à prothèses vissées, cimentées, retenues, etc., ... même dans les cas d'espace limité.



TRIPLO NARROW

Controla la posición directamente del paciente
controlando la lavadora implantando el
control de la posición angular.

Previsión de la implantación en
el paciente mediante el uso de
la nueva técnica de control
de la posición angular.
+34 965 306 464

eckermann
DENTAL IMPLANT SYSTEM

ATENCIÓN AL CLIENTE

atencionalcliente@eckermann.es

+34 965 306 464

www.eckermann.es

C./ IRLANDA,2 03160 Almoradí - ALICANTE - ESPAÑA

