



TRIPLO
PERIO



eckermann
DENTAL IMPLANT SYSTEM

www.eckermann.es

TRIPTO PERIO

EL IMPLANTE DE CONEXIÓN INTERNA CON ANILLO PULIDO DE ECKERMANN



Un implante anatómico caracterizado por un gran respeto al perfil de emergencia, y que responde a las exigencias actuales: un diseño robusto, avanzado y de fácil aplicación, muy versátil en las propuestas protésicas y que alcanza las máximas cotas de seguridad, estabilidad y sencillez.

Tripto Perio, es la opción de Eckermann para la resolución de casos en los que las exigencias estéticas son determinantes gracias a su diseño cervical, ideal para la relación de los tejidos blandos supracrestales con el implante.

ANILLO PULIDO

Especialmente calculado para la adaptación de los hemidesmosomas del epitelio gingival.

MICROESPIRAS

La zona cervical del implante ha sido diseñada con micro-roskas que ofrecen una distribución óptima de las cargas funcionales con el objetivo de preservar al máximo el hueso marginal y estimular la calcificación a ese nivel.

ESPIRAS DE COMPRESIÓN VARIABLE

El macrodiseño del implante incorpora espiras de compresión variable que proporcionan unos altísimos niveles de estabilidad primaria.

Este perfil de rosca, diferente en cada tramo del implante, se acomoda a cada zona del hueso según sus características de densidad, optimizando y mejorando su capacidad de recibir cargas.

ÁPICE ESFÉRICO ATRAUMÁTICO

La forma esférica de la zona apical del implante protege las estructuras anatómicas de lesiones.



DOBLE PERFIL DE ROSCA

Facilita y acorta el tiempo de inserción del implante y disminuyendo el calentamiento óseo.



ALVEOLOS HELICOIDALES

Ayudan a la colocación del implante, e incrementan la cantidad de tejido óseo en contacto íntimo con el implante.




TRANSPORTADOR Y TORNILLO DE CIERRE INCLUIDOS

El implante Tripto Perio se presenta en doble envase estéril e incluye transportador y tornillo de cierre.


LA SUPERFICIE ECKCYTE®





Triplo® Perio es un implante de última generación de titanio purísimo, con una micro y nano rugosidad producto de los más modernos tratamientos de grabado ácido, con el resultado de una superficie óptima para la biocompatibilidad con los osteocitos.

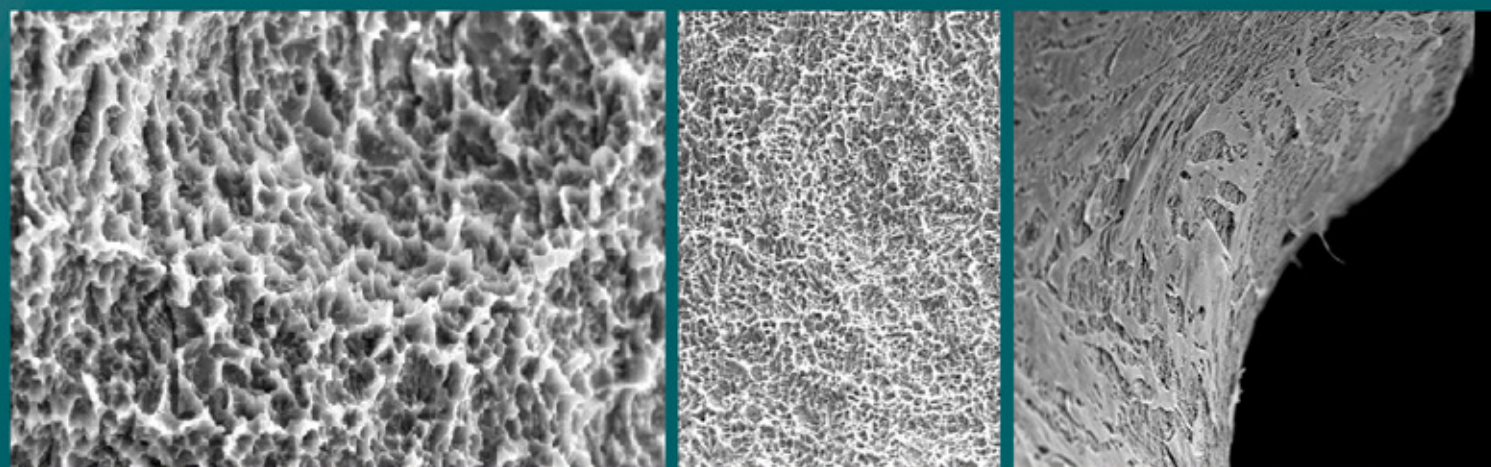

ECKCYTE® proporciona un aumento de la superficie en contacto con el hueso ofreciéndole una matriz ideal gracias a una superficie rugosa muy homogénea y microporosa, que constituye un factor importante para la mejor proliferación osteoblástica y la osteointegración del implante.^(*)

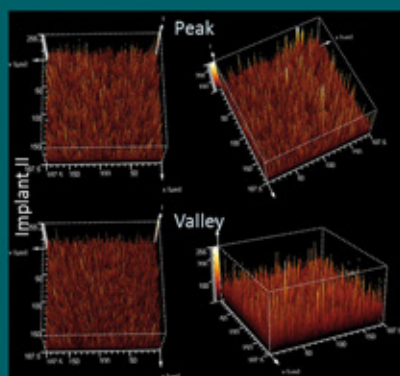

El tratamiento superficial aporta una eficaz protección a la corrosión y una alta estabilidad dotándolo, además, de unas propiedades hidrófilas que aceleran la adsorción de fluidos en toda la superficie del implante, mejorando así la interacción del medio biológico y el implante y su capacidad de osteointegración.^(*)

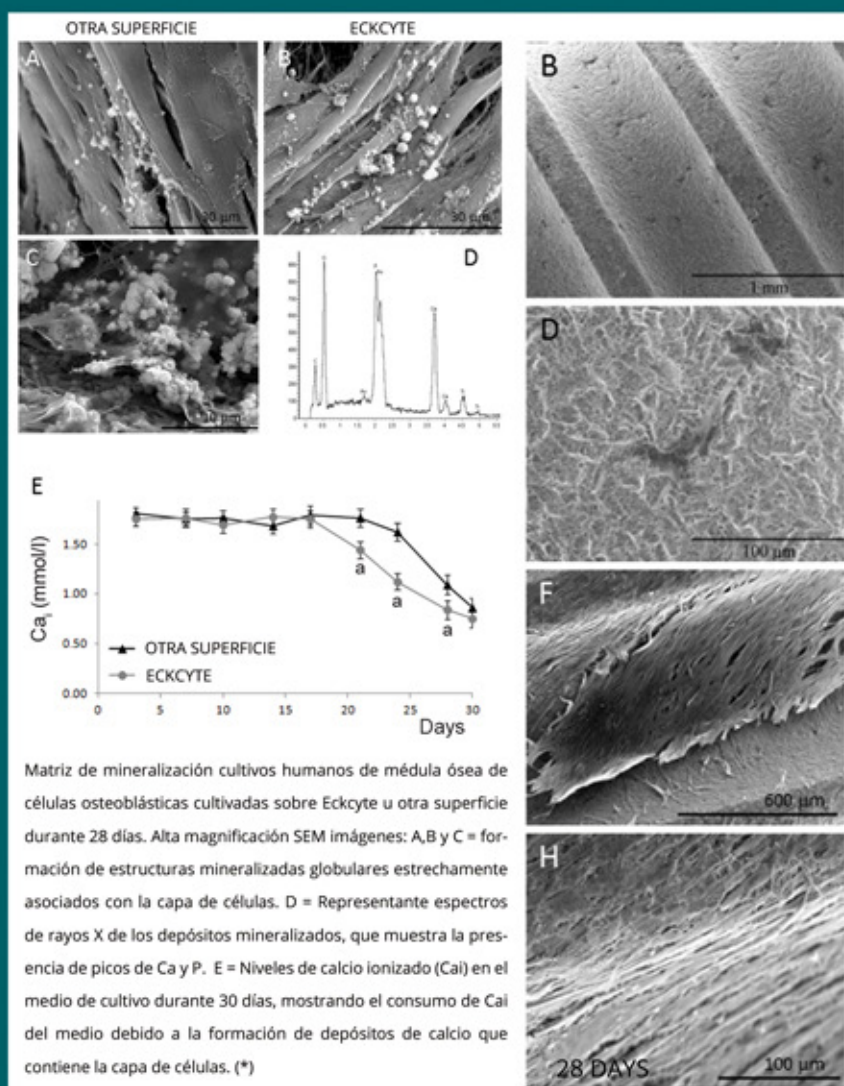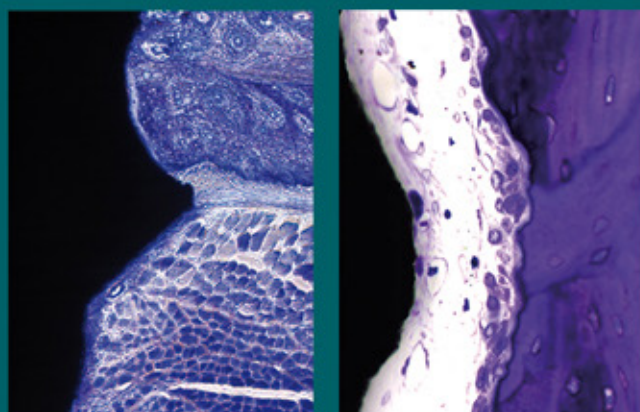


Matriz de mineralización cultivos humanos de médula ósea de células osteoblásticas cultivadas sobre Eckcyte u otra superficie durante 28 días. Alta magnificación SEM imágenes: A,B y C = formación de estructuras mineralizadas globulares estrechamente asociados con la capa de células. D = Representante espectros de rayos X de los depósitos mineralizados, que muestra la presencia de picos de Ca y P. E = Niveles de calcio ionizado (Ca²⁺) en el medio de cultivo durante 30 días, mostrando el consumo de Ca²⁺ del medio debido a la formación de depósitos de calcio que contiene la capa de células. (*)

LA CONEXIÓN CONELOCK



Los implantes Triplo® Perio incorporan la exclusiva conexión CONELOCK® de Eckermann, estudiada y experimentada a lo largo de más de 15 años, caracterizada por su precisión y estabilidad de acoplamiento con los aditamentos protésicos y que garantiza el éxito de cualquier solución protésica con ausencia total de micro-movimientos.

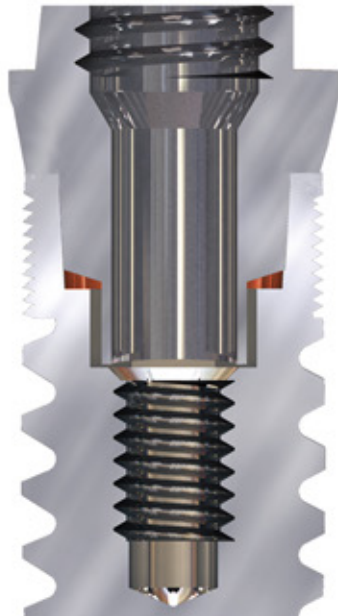

ESTABILIDAD, FIABILIDAD Y ROBUSTEZ


La singular conexión protésica CONELOCK® es uno de sus hechos diferenciales más sobresalientes y aporta gran confianza de estabilidad y mantenimiento de las rehabilitaciones protésicas sobre estos implantes a largo plazo.

Gracias a la precisión de esta conexión, el conjunto implante-pilar tiene un comportamiento monobloque muy robusto, tal y como si no existiese conexión alguna. Al no existir micromovimientos, se asegura una unión estable y fiable obteniendo una óptima transmisión de las cargas oclusales siendo, por tanto, lo más parecido al comportamiento del diente natural.

SELLADO BACTERIOLÓGICO

La conexión CONELOCK® de Eckermann proporciona un cierre mecánico totalmente hermético, consiguiendo un sellado perfecto implante-pilar que, a modo de barrera, evita infiltraciones de micro-organismos que puedan ser causa de perimplantitis, proliferación de bacterias y olores desagradables en la boca del paciente.

Estudios universitarios han comprobado la total estanqueidad de esta conexión protésica, avalando la inexistencia de filtraciones bacterianas. (**)

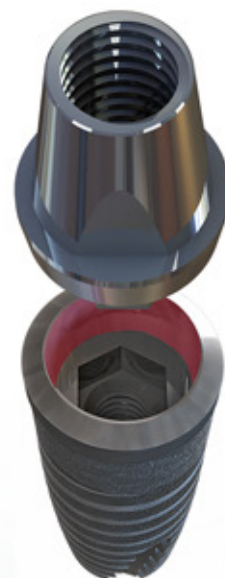

(**) Estudio para la Evaluación de la microfiliación y ajuste en un nuevo concepto de conexión implantológica./ref:AB-15-DO-06. Dra. Mireia Pato; Dr. Lluís Giner; Dr. Óscar Figueras. Universitat Internacional de Catalunya.

REVERSIBILIDAD

CONELOCK® aporta una perfecta fijación implante-pilar con un comportamiento monobloque, fiable y duradero. Sin embargo, el diseño de su geometría permite retirar las prótesis, en caso de ser necesario, de una manera sencilla y sin complicaciones, lo que abre una nueva puerta a las soluciones protésicas, además de un considerable ahorro de tiempo y costes.

EASY LINK & TRIPLO, UNA COMBINACIÓN PERFECTA



EASY LINK de Eckermann es un sistema de prótesis fija para el paciente y reversible para el clínico que ha demostrado ser una alternativa de fácil aplicación y que consigue reunir en una sola, todas las ventajas de las prótesis atornilladas y de las cementadas, eliminando sus desventajas.

En Easy Link se aprovechan los procedimientos tradicionales de confección de prótesis dental y/o las nuevas tecnologías de CAD-CAM que nos permitirán obtener prótesis de todo tipo utilizando los materiales de última generación.

Este sistema de "retención protésico-encapsulado" es una patente española de Eckermann aplicable en prótesis dental general y compatible con múltiples sistemáticas de implantes dentales capaz de eliminar las chimeneas, el cemento y compensar angulaciones.



TRIPLO PERIO

IMPLANTES

TRIPLO*PERIO

CE 0051

Tapón de cierre incluido

- REF. REF.
 IPTV 354008
 IPTV 354010
 IPTV 354011
 IPTV 354013
 IPTV 354015
- Ø 4,0 mm.
 1 8,0 mm.
 1 10,0 mm.
 1 11,5 mm.
 1 13,0 mm.
 1 15,0 mm.

- REF. REF.
 IPTV 354506
 IPTV 354508
 IPTV 354510
 IPTV 354511
 IPTV 354513
 IPTV 354515
- Ø 4,5 mm.
 1 6,0 mm.
 1 8,0 mm.
 1 10,0 mm.
 1 11,5 mm.
 1 13,0 mm.
 1 15,0 mm.

- REF. REF.
 IPTV 355006
 IPTV 355008
 IPTV 355010
 IPTV 355011
 IPTV 355013
 IPTV 355015
- Ø 5,0 mm.
 1 6,0 mm.
 1 8,0 mm.
 1 10,0 mm.
 1 11,5 mm.
 1 13,0 mm.
 1 15,0 mm.

INSTRUMENTAL

Caja Universal Box

CE REF. CKSU



Caja Box Topes

CE REF. CKST



Bisturí circular

CE REF. BC 40
 BC 50
 BC 60

Ø 4,0 mm.
 Ø 5,0 mm.
 Ø 6,0 mm.



Fresa lanceolada

CE 0051 REF. FLM 200 K
 FLM 200 KC

larga
 corta



Fresa helicoidal de acabado

CE 0051 REF. FSH 25 K
 FSH 30 K
 FSH 35 K
 FSH 40 K
 FSH 45 K
 FSH 50 K

Ø 2,5 mm.
 Ø 3,0 mm.
 Ø 3,5 mm.
 Ø 4,0 mm.
 Ø 4,5 mm.
 Ø 5,0 mm.



Fresa helicoidal de acabado corta

CE 0051 REF. FSH 25 K C
 FSH 30 K C
 FSH 35 K C
 FSH 40 K C
 FSH 45 K C
 FSH 50 K C

Ø 2,5 mm.
 Ø 3,0 mm.
 Ø 3,5 mm.
 Ø 4,0 mm.
 Ø 4,5 mm.
 Ø 5,0 mm.



Topes de fresado

CE REF. T1 L6
 T1 L8
 T1 L10
 T1 L11
 T1 L13
 T1 L15

Ø 2,0, Ø 2,5,
 Ø 3,0 mm.
 1 6,0 mm.
 1 8,0 mm.
 1 10,0 mm.
 1 11,5 mm.
 1 13,0 mm.
 1 15,0 mm.

REF. T2 L6
 T2 L8
 T2 L10
 T2 L11
 T2 L13
 T2 L15

Ø 3,5, Ø 4,0
 1 6,0 mm.
 1 8,0 mm.
 1 10,0 mm.
 1 11,5 mm.
 1 13,0 mm.
 1 15,0 mm.

REF. T3 L6
 T3 L8
 T3 L10
 T3 L11
 T3 L13
 T3 L15

Ø 4,5, Ø 5,0
 1 6,0 mm.
 1 8,0 mm.
 1 10,0 mm.
 1 11,5 mm.
 1 13,0 mm.
 1 15,0 mm.

Prolongador de fresa

CE REF. EX 650



Paralelizador

CE REF. PL 15



Iniciador de rosca

CE REF. MRS 3010 K
 MRS 3510 K
 MRS 4010 K
 MRS 4510 K
 MRS 5010 K

Ø 3,0 mm.
 Ø 3,5 mm.
 Ø 4,0 mm.
 Ø 4,5 mm.
 Ø 5,0 mm.



Llave rosca implantes universal

CE REF. LCT IH

Para contra-ángulo



REF. LHT 17
 LHT 23

Para carraca
 corta
 larga



Llave extractora pilares universal

CE REF. LEP IKT 25



Carraca

CE REF. CR



Carraca dinamométrica

CE REF. CRT 35

35 Nw



Destornillador hexagonal

CE REF. DH 17
 DH 23

corto
 largo



Llave portamechas universal

CE REF. LMU



Mecha hexagonal

CE REF. MHT



Instrumento portamechas

CE REF. DM



CONFORMACIÓN DE TEJIDOS

Tornillo de cierre

CE 0051 REF. TC IKT
 TC IKT L

1 2,0 mm.



Moldeador gingival periodontal

CE 0051 REF. MG 5515 IPT
 MG 5530 IPT
 MG 5550 IPT
 MG 5570 IPT

Ø 5,5 mm.
 1 1,5 mm.
 1 3,0 mm.
 1 5,0 mm.
 1 7,0 mm.

Ø 6,0 mm.
 1 2,0 mm.
 1 7,0 mm.

MG 6020 IPT
 MG 7030 IPT
 MG 7050 IPT
 MG 7070 IPT



TOMA DE IMPRESIÓN

Tránsfer impresión directa + tornillo

CE REF. Ø 5,5 mm. TRT P



Tránsfer impresión indirecta + tornillo

CE REF. Ø 5,5 mm. TRT A



Réplica implante

CE REF. RPT 40
 RPT 45
 RPT 50

Ø 4,0 mm.
 Ø 4,5 mm.
 Ø 5,0 mm.



PRÓTESIS

Tornillo oclusal

CE 0051 REF. THX 1813



Tornillo de asiento

CE 0051 REF. TCM 40 IKT
 TCM 60 IKT

1 4,0 mm.
 1 6,0 mm.



Pilar mecanizado periodontal

CE 0051 REF. PM 7616 IPT

Para cementar
 Ø 6,0 mm
 1 7,0 mm.
 1 Hombro 1,6 mm.



Para implante Ø 4,0 mm.
 1 Hombro 1,6 mm.
 1 4,0 mm. PM IPT40 5040
 1 6,0 mm. PM IPT40 5060
 1 9,0 mm. PM IPT40 5090



Para implante Ø 4,5 mm.
 1 Hombro 1,6 mm.
 1 4,0 mm. PM IPT45 5540
 1 6,0 mm. PM IPT45 5560
 1 9,0 mm. PM IPT45 5590



Para implante Ø 5,0 mm.
 1 Hombro 1,6 mm.
 1 4,0 mm. PM IPT50 6040
 1 6,0 mm. PM IPT50 6060
 1 9,0 mm. PM IPT50 6090



Pilar angulado

CE 0051 REF. PMA 20 IKT
 PMA 20B IKT

Ø 5,0 mm 1 Hombro 1,6 mm
 1 9,0 mm



Pilar mecanizado INTERFASE

CE 0051 REF. PI 4516 IPT

Ø 5,0 mm 1 Hombro 1,6 mm
 1 4,0 mm



Pilar sobrecolable CrCo

CE 0051 REF. PSC IKT A

Ø 5,0 mm
 ANTIGIRO



Pilar calcinable periodontal

CE ANTIGIRO 1 9,0 mm

REF. CA 40 IPT A
 CA 45 IPT A
 CA 50 IPT A

Ø 4,5 mm.
 Ø 5,0 mm.
 Ø 7,0 mm.



Asiento calcinable

CE REF. AC



Cofia calcinable

CE REF. CA PM 40
 CA PM 40 A
 CA PM

1 4,0 mm.
 1 4,0 mm.
 1 6,0 mm.



Anillo metálico

CE 0051 REF. AM



Cofia metálica

CE 0051 REF. CM PM 40
 CM PM

Ø 5,5 mm.
 1 4,0 mm.
 1 6,0 mm.



Pilar LOCATOR*

CE 0051 REF. PL IKT 04
 PL IKT 10
 PL IKT 20
 PL IKT 30
 PL IKT 40

Ø 4,1 mm.
 1 0,4 mm.
 1 1 mm.
 1 2 mm.
 1 3 mm.
 1 4 mm.



Pack de proceso LOCATOR*

CE 0051 REF. EX 8519



Botón nylon LOCATOR*

CE 0051 REF. EX 8524-2
 EX 8527-2
 EX 8529-2
 EX 8547-2

Ret. Fuerte 2 pcs.
 Ret. Media 2 pcs.
 Ret. Ligera 2 pcs.
 Angulados 2 pcs.



Herramienta básica LOCATOR*

CE Comercializada por Eickemann
 REF. EX 8393



Tránsfer LOCATOR*

CE REF. EX 8505



Réplica LOCATOR*

CE REF. EX 8530



Convertidores de conexión

CE 0051 REF. C27 IKT IH
 C42 IKT IH
 C27 IKT IS
 C42 IKT IS

A HEXÁGONO
 1 2,7 mm.
 1 4,2 mm.
 A ALL SPIRAL
 1 2,7 mm.
 1 4,2 mm.



Pilar cónico recto

CE 0051 REF. PMMU 1 IKT
 PMMU 2 IKT
 PMMU 3 IKT
 PMMU 4 IKT
 PMMU 5 IKT
 PMMU 6 IKT
 PMMU 7 IKT



Pilar cónico angulado

CE 0051 REF. PMMU A 17 2 IKT
 PMMU A 17 3 IKT
 PMMU A 30 3 IKT
 PMMU A 30 4 IKT



PRÓTESIS EASY LINK*
 Consultar catálogo Easy Link



Estados Unidos, directamente de Eckermann, Inc. o de la filial más cercana, en el extranjero, con un ángulo de 15°.

Coloque los implantes en los huesos maxilares y mandibulares, en los sitios de los dientes naturales perdidos. Los implantes Eckermann se insertan en los huesos maxilares y mandibulares, en los sitios de los dientes naturales perdidos.

eckermann
DENTAL IMPLANT SYSTEM

ATENCIÓN AL CLIENTE

atencionalcliente@eckermann.es

+34 965 306 464

www.eckermann.es

C./ IRLANDA,2 03160 Almoradí - ALICANTE - ESPAÑA

