



TRIPLO
PERIO




eckermann
DENTAL IMPLANT SYSTEM

www.eckermann.es

TRIPLO PERIO

L'IMPLANT À CONNEXION INTERNE DE ECKERMANN AVEC ANNEAU POLI

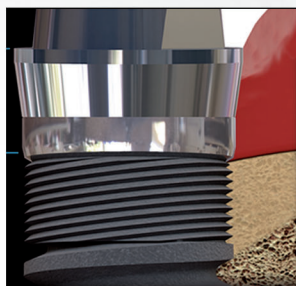

Un implant caractérisé par un grand respect du profil d'urgence, et qui répond aux exigences actuelles: une conception robuste, moderne et facile à poser, très polyvalente dans les propositions prothétiques et qui atteint un niveau maximum de sécurité, stabilité et simplicité.

Triplo Perio, est la solution apportée par Eckermann pour résoudre les cas dans lesquels les exigences esthétiques sont cruciales grâce à la conception de sa zone cervicale, idéale pour favoriser la relation entre les tissus mous supracrestaux et

ANNEAU POLI

Spécialement conçu pour l'adaptation des hémidesmosomes de l'épithélium gingival.

MICROSPIRES



La zone cervicale de l'implant a été conçue avec des micro-filetages qui offrent une répartition optimale des charges fonctionnelles afin de préserver au maximum l'os marginal et de stimuler la calcification à ce niveau.

SPIRES À COMPRESSION VARIABLE

Le macrodesign de l'implant intègre des spires à compression osseuse variable qui offrent de hauts niveaux de stabilité primaire. Ce profil de filetage, différent selon la section de l'implant, s'adapte à chaque zone de l'os en fonction de ses caractéristiques de densité, optimisant et améliorant sa capacité à supporter des charges.

APEX ARRONDI ATRAUMATIQUE

La forme sphérique de la zone apicale de l'implant protège les structures anatomiques des blessures.

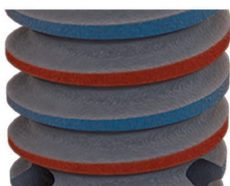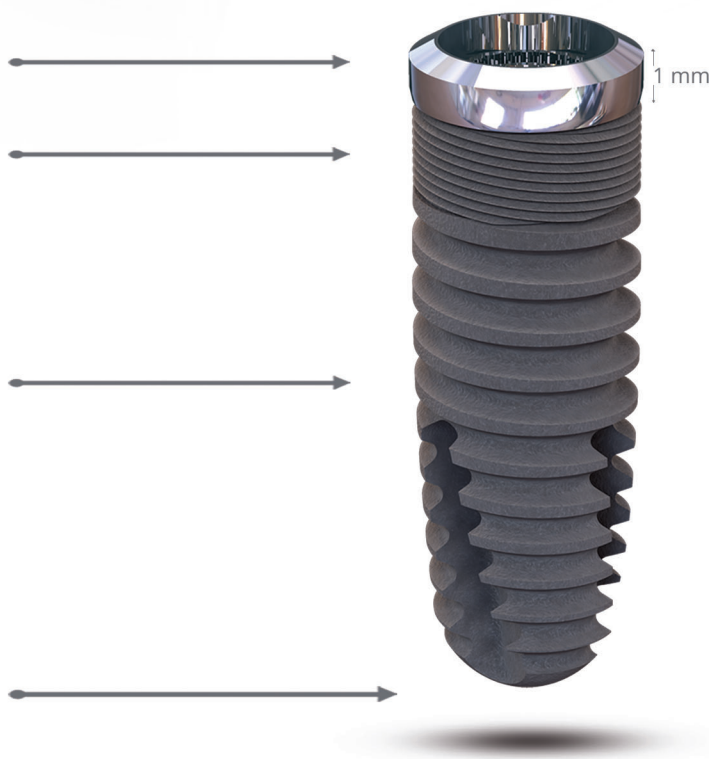

PROFIL À DOUBLE FILETAGE

Il facilite et raccourcit le temps d'insertion de l'implant, réduisant ainsi l'échauffement osseux.




ALVÉOLES HÉLICOÏDAUX

Ils facilitent la mise en place de l'implant et augmentent la quantité de tissu osseux en contact intime avec l'implant.




TRANSPORTEUR ET VIS CHIRURGICQUE DE FERMETURE INCLUS

L'implant Triplo Perio est présenté dans un double emballage stérile et inclut un transporteur et une vis de fermeture.

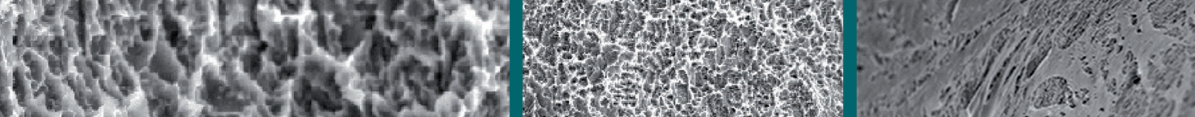The logo for ECK CYTE SURFACE is a circular emblem. The words "ECK" and "CYTE" are stacked vertically in a large, bold, sans-serif font. Below them, the word "SURFACE" is written in a smaller, all-caps, sans-serif font, separated from the text above by a thin horizontal line. The entire logo is set against a dark teal background.


The top row consists of three panels of histological images. The left panel shows a dense, granular tissue structure with many small, dark-staining cells. The middle panel shows a more organized, cellular structure with distinct nuclei and cytoplasm. The right panel shows a cross-section of a tissue layer, possibly a blood vessel or a duct, with a clear lumen and surrounding cellular walls.

Figure 1 consists of four 3D surface plots arranged in a 2x2 grid. The top row is labeled 'Peak' and the bottom row is labeled 'Valley'. The left column is labeled 'Implant II' and the right column is labeled 'Valley'. Each plot shows a 3D surface with axes for x (mm), y (mm), and z (mm). A color bar on the right of each plot indicates height from 100 to 250 mm. The 'Peak' plots show a high, flat surface, while the 'Valley' plots show a lower, more irregular surface.

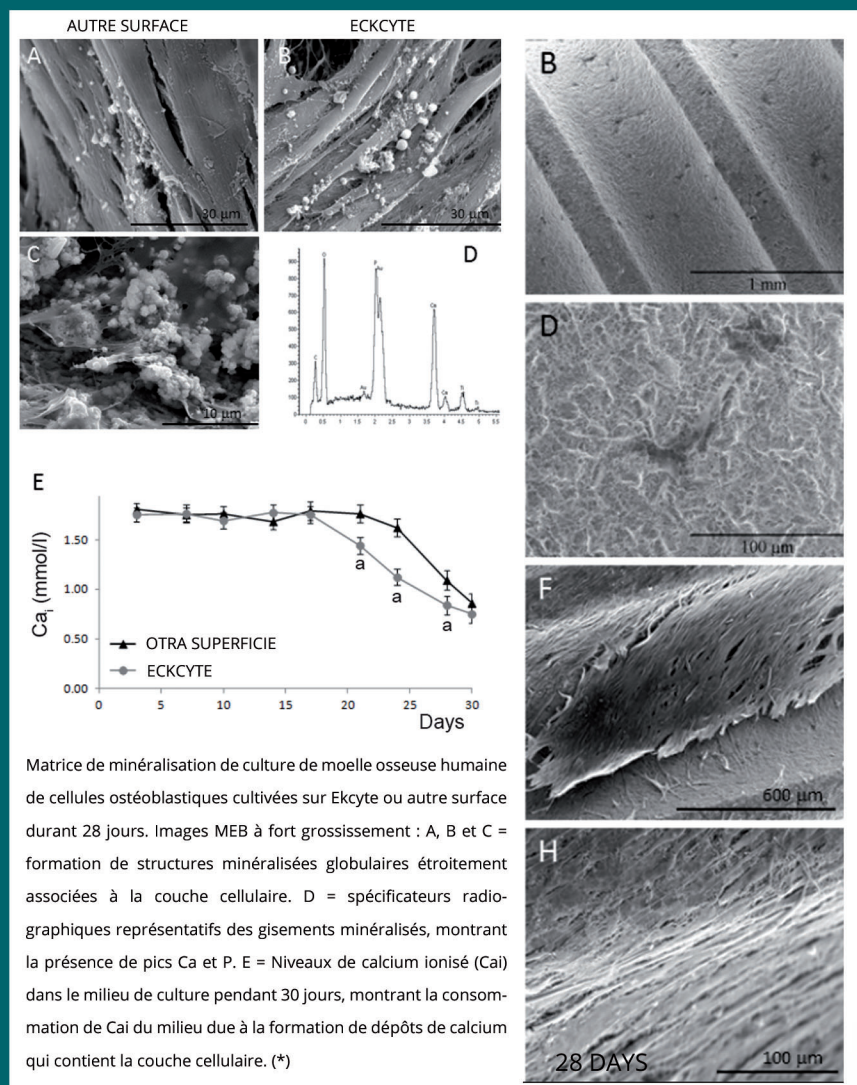

CONNEXION CONELOCK

Les implants Triplo® incorporent la connexion exclusive CONELOCK de Eckerman, développée et testée depuis plus de 15 ans. La connexion se caractérise par sa précision et sa stabilité, en combinaison avec les attachements et garantit le succès de toute option prothétique avec une absence totale de micromouvement.

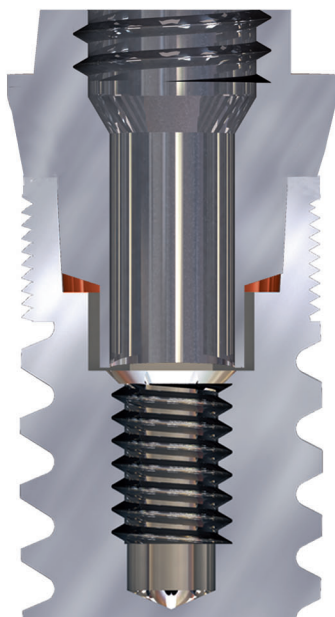

STABILITÉ, FIABILITÉ, ROBUSTESSE

La connexion exclusive CONELOCK est l'une de ses caractéristiques différentielles les plus remarquables et apporte une grande confiance dans la stabilité et le maintien à long terme des réhabilitations prothétiques sur ces implants.


Grâce à la précision de cette connexion, l'ensemble implant-pilier offre un comportement monobloc très robuste, comme si la connexion n'existait pas. En l'absence de micromouvement, l'union stable et fiable est assurée et la transmission des charges occlusales optimale. Par conséquent le comportement d'une dent naturelle est pratiquement reproduit.

SCELLAGE BACTÉRIOLOGIQUE

La connexion CONELOCK® d'Eckermann offre un scellage mécanique totalement hermétique, offrant une parfaite étanchéité implant-pilier qui, agissant comme une barrière, empêche toute filtration de micro-organismes susceptible de provoquer une périimplantite, une prolifération bactérienne et des odeurs désagréables dans la bouche du patient.

Des études universitaires ont démontré l'étanchéité totale de cette connexion prothétique, qui garantit l'absence de filtrations bactériennes. (**)

(**) Etude destinée à l'évaluation de la microfiltration et à l'ajustement dans un nouveau concept de connexion implantaire. / Réf AB-15-DO-06. Dra. Mireia Pato; Dr. Lluís Giner; Dr Oscar Figueras. Université internationale de Catalogne.

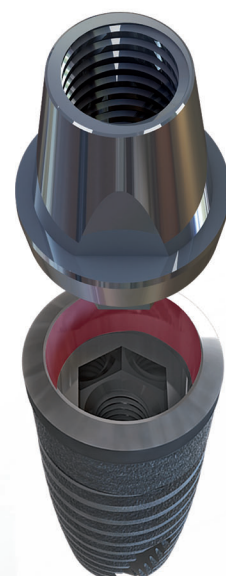

REVERSIBILITÉ

CONELOCK® offre une parfaite fixation implant-pilier avec un comportement monobloc fiable et durable, tout en permettant de retirer la prothèse, si nécessaire, sans complication, grâce à la conception de sa géométrie. Cela ouvre une nouvelle porte aux solutions prothétiques, en plus d'un considérable gain de temps et d'argent.

EASY LINK ET TRIPLO, UNE COMBINAISON PARFAITE

EASY LINK by Eckermann est un Système de prothèses fixes et réversibles qui a démontré être une alternative facile à poser et qui, de plus, permet réunir les avantages des prothèses, qu'elles soient vissées ou cimentées, tout en éliminant leurs inconvénients.

Easy Link se caractérise pour permettre le choix entre utiliser les procédés traditionnels de fabrication de prothèses dentaires et/ou les nouvelles technologies CAD-CAM qui permettent d'obtenir des prothèses extrêmement diverses en utilisant des matériaux de dernière génération.

Ce système de « rétention prothétique encapsulée » est un brevet original Eckermann, déposé en 2009, applicable aux prothèses dentaires générales.

Ce système exclusif permet d'éviter l'utilisation de cheminées comme celui du ciment et de compenser les angulations, devenant une solution prothétique fixe pour le patient et réversible pour le clinicien.



TRIPLIO PERIO

IMPLANTES

TRIPLO*PERIO

CE 0051

Tapón de cierre incluido

REF.	REF.
Ø 4,0 mm.	IPTV 354008
Ø 8,0 mm.	IPTV 354010
Ø 10,0 mm.	IPTV 354011
Ø 11,5 mm.	IPTV 354013
Ø 13,0 mm.	IPTV 354015
Ø 15,0 mm.	

REF.	REF.
Ø 4,5 mm.	IPTV 354506
Ø 6,0 mm.	IPTV 354508
Ø 8,0 mm.	IPTV 354510
Ø 10,0 mm.	IPTV 354511
Ø 11,5 mm.	IPTV 354513
Ø 13,0 mm.	IPTV 354515
Ø 15,0 mm.	

REF.	REF.
Ø 5,0 mm.	IPTV 355006
Ø 6,0 mm.	IPTV 355008
Ø 8,0 mm.	IPTV 355010
Ø 10,0 mm.	IPTV 355011
Ø 11,5 mm.	IPTV 355013
Ø 13,0 mm.	IPTV 355015
Ø 15,0 mm.	

INSTRUMENTAL

Caja Universal Box

CE REF. CKSU



Caja Box Topes

CE REF. CKST



Bisturí circular

CE REF. BC 40
Ø 4,0 mm
CE REF. BC 50
Ø 5,0 mm
CE REF. BC 60
Ø 6,0 mm




Fresa lanceolada

CE 0051 REF. FLM 200 K
larga REF. FLM 200 KC
corta



Fresa helicoidal de acabado

CE 0051 REF. FSH 25 K
Ø 2,5 mm
REF. FSH 30 K
Ø 3,0 mm
REF. FSH 35 K
Ø 3,5 mm
REF. FSH 40 K
Ø 4,0 mm
REF. FSH 45 K
Ø 4,5 mm
REF. FSH 50 K
Ø 5,0 mm

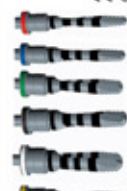

Fresa helicoidal de acabado corta

CE 0051 REF. FSH 25 K C
Ø 2,5 mm
REF. FSH 30 K C
Ø 3,0 mm
REF. FSH 35 K C
Ø 3,5 mm
REF. FSH 40 K C
Ø 4,0 mm
REF. FSH 45 K C
Ø 4,5 mm
REF. FSH 50 K C
Ø 5,0 mm



Topes de fresado

REF.	REF.
Ø 2,0, Ø 2,5, Ø 3,0 mm	T1 L6
Ø 6,0 mm.	T1 L8
Ø 8,0 mm.	T1 L10
Ø 10,0 mm.	T1 L11
Ø 11,5 mm.	T1 L13
Ø 13,0 mm.	T1 L15
Ø 15,0 mm.	

REF.	REF.
Ø 3,5, Ø 4,0	T2 L6
Ø 6,0 mm.	T2 L8
Ø 8,0 mm.	T2 L10
Ø 10,0 mm.	T2 L11
Ø 11,5 mm.	T2 L13
Ø 13,0 mm.	T2 L15
Ø 15,0 mm.	

REF.	REF.
Ø 4,5, Ø 5,0	T3 L6
Ø 6,0 mm.	T3 L8
Ø 8,0 mm.	T3 L10
Ø 10,0 mm.	T3 L11
Ø 11,5 mm.	T3 L13
Ø 13,0 mm.	T3 L15
Ø 15,0 mm.	

Prolongador de fresa

CE REF. EX 650



Paralelizador

CE REF. PL 15



Iniciador de rosca

CE REF. MRS 3010 K
Ø 3,0 mm.
REF. MRS 3510 K
Ø 3,5 mm.
REF. MRS 4010 K
Ø 4,0 mm.
REF. MRS 4510 K
Ø 4,5 mm.
REF. MRS 5010 K
Ø 5,0 mm.



Llave rosca implantes universal

CE Para contra-ángulo REF. LCT IH
REF. LCT IH



CE Para carraca REF. LHT 17
corta REF. LHT 23
larga



Llave extractora pilares universal

CE REF. LEP IKT 25



Carraca

CE REF. CR



Carraca dinamométrica

CE REF. CRT 35
35 Nw



Destornillador hexagonal

CE REF. DH 17
corto REF. DH 23
largo



Llave portamechas universal

CE REF. LMU



Mecha hexagonal

CE REF. MHT



Instrumento portamechas

CE REF. DM



CONFORMACIÓN DE TEJIDOS

Tornillo de cierre

CE 0051 REF. TC IKT
Ø 2,0 mm. REF. TC IKT L



Moldeador gingival periodontal

CE 0051 REF. MG 5515 IPT
Ø 5,5 mm. REF. MG 5530 IPT
Ø 6,0 mm. REF. MG 5550 IPT
Ø 7,0 mm. REF. MG 5570 IPT
Ø 8,0 mm. REF. MG 6020 IPT
Ø 9,0 mm. REF. MG 7030 IPT
Ø 10,0 mm. REF. MG 7050 IPT
Ø 11,0 mm. REF. MG 7070 IPT



TOMA DE IMPRESIÓN

Tránsfer impresión directa + tornillo

CE REF. Ø 5,5 mm. TRT P



Tránsfer impresión indirecta + tornillo

CE REF. Ø 5,5 mm. TRT A



Réplica implante

CE REF. RPT 40
Ø 4,0 mm. REF. RPT 45
Ø 4,5 mm. REF. RPT 50
Ø 5,0 mm.



PRÓTESIS

Tornillo oclusal

CE 0051 REF. THX 1813



Tornillo de asiento

CE 0051 REF. TCM 40 IKT
Ø 4,0 mm. REF. TCM 60 IKT
Ø 6,0 mm.



Pilar mecanizado periodontal

CE 0051 Para cementar REF. Ø 6,0 mm. REF. PM 7616 IPT
Ø 6,0 mm. REF. PM 7616 IPT
Ø 7,0 mm.



Para implante Ø 4,0 mm. REF. Hombro 1,6 mm.

Ø 4,0 mm. REF. PM IPT40 5040
Ø 6,0 mm. REF. PM IPT40 5060
Ø 9,0 mm. REF. PM IPT40 5090



Para implante Ø 4,5 mm. REF. Hombro 1,6 mm.

Ø 4,0 mm. REF. PM IPT45 5540
Ø 6,0 mm. REF. PM IPT45 5560
Ø 9,0 mm. REF. PM IPT45 5590



Para implante Ø 5,0 mm. REF. Hombro 1,6 mm.

Ø 4,0 mm. REF. PM IPT50 6040
Ø 6,0 mm. REF. PM IPT50 6060
Ø 9,0 mm. REF. PM IPT50 6090



Pilar angulado

CE 0051 Ø 5,0 mm. REF. Hombro 1,6 mm.
Ø 9,0 mm. REF. PMA 20 IKT
REF. PMA 20B IKT



Pilar mecanizado INTERFASE

CE 0051 Ø 5,0 mm. REF. Hombro 1,6 mm.
REF. PI 4516 IPT
Ø 4,0 mm.



Pilar sobrecolable CrCo

CE 0051 Ø 5,0 mm. REF. ANTIGIRO PSC IKT A



Pilar calcinable periodontal

CE ANTIGIRO REF. CA 40 IPT A
Ø 4,5 mm. REF. CA 45 IPT A
Ø 5,0 mm. REF. CA 50 IPT A
Ø 7,0 mm.



Asiento calcinable

CE REF. AC



Cofia calcinable

CE REF. CA PM 40
Ø 4,0 mm. REF. CA PM 40 A
Ø 4,0 mm. REF. CA PM
Ø 6,0 mm.



Anillo metálico

CE 0051 REF. AM



Cofia metálica

CE 0051 REF. CM PM 40
Ø 5,5 mm. REF. CM PM
Ø 4,0 mm. REF. CM PM
Ø 6,0 mm.



Pilar LOCATOR*

CE 0051 REF. PL IKT 04
Ø 4,1 mm. REF. PL IKT 10
Ø 1,4 mm. REF. PL IKT 20
Ø 1,1 mm. REF. PL IKT 30
Ø 1,2 mm. REF. PL IKT 40
Ø 1,3 mm. REF. PL IKT 40
Ø 1,4 mm.



Pack de proceso LOCATOR*

CE 0051 REF. EX 8519
COMPLETO



Botón nylon LOCATOR*

CE 0051 REF. EX 8524-2
Ret. Fuerte 2 pcs. REF. EX 8527-2
Ret. Media 2 pcs. REF. EX 8529-2
Ret. Ligera 2 pcs. REF. EX 8547-2
Angulados 2 pcs.



Herramienta básica LOCATOR*

CE Comercializada por Eickemmann REF. EX 8393
MANUAL



Tránsfer LOCATOR*

CE REF. EX 8505



Réplica LOCATOR*

CE REF. EX 8530



Convertidores de conexión

CE 0051 REF. C27 IKT IH
A HEXÁGONO REF. C42 IKT IH
Ø 2,7 mm. REF. C27 IKT IS
Ø 4,2 mm. REF. C42 IKT IS
A ALL SPIRAL REF. C27 IKT IS
Ø 2,7 mm. REF. C42 IKT IS
Ø 4,2 mm.



Pilar cónico recto

CE 0051 REF. PMMU 1 IKT
REF. PMMU 2 IKT
REF. PMMU 3 IKT
REF. PMMU 4 IKT
REF. PMMU 5 IKT
REF. PMMU 6 IKT
REF. PMMU 7 IKT



Pilar cónico angulado

CE 0051 REF. PMMU A 17 2 IKT
REF. PMMU A 17 3 IKT
REF. PMMU A 30 3 IKT
REF. PMMU A 30 4 IKT



PRÓTESIS EASY LINK* Consultar catálogo Easy Link



Estados Unidos, directamente de Eckermann, Inc. o de la filial más cercana, en el extranjero, para la venta de implantes dentales.

Estados Unidos, directamente de Eckermann, Inc. o de la filial más cercana, en el extranjero, para la venta de implantes dentales.

eckermann
DENTAL IMPLANT SYSTEM

ATENCIÓN AL CLIENTE

atencionalcliente@eckermann.es

+34 965 306 464

www.eckermann.es

C./ IRLANDA,2 03160 Almoradí - ALICANTE - ESPAÑA

