



TRIPLO PERIO




eckermann
DENTAL IMPLANT SYSTEM

www.eckermann.es



TRIPLO PERIO

O IMPLANTE DA ECKERMANN DE CONEXÃO INTERNA COM ANEL POLIDO

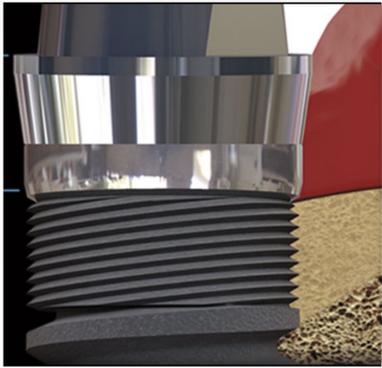

Um implante caracterizado por um grande respeito pelo perfil de emergência, e que responde às exigências atuais: um design robusto, avançado e de fácil aplicação, muito versátil nas propostas protéticas e que alcança os níveis máximos de segurança, estabilidade e simplicidade.

Triplo Perio é a opção da Eckermann para a resolução de casos em que as exigências estéticas são decisivas graças ao seu desenho cervical, ideal para a relação dos tecidos moles supracrestais com o implante.

ANEL POLIDO

Especialmente calculado para a adaptação dos hemidesmossomas do epitélio gengival.

MICROESPIRAS


A área cervical do implante foi projetada com microespiras que oferecem uma ótima distribuição das cargas funcionais com o objetivo de preservar ao máximo o osso marginal e de estimular a calcificação a esse nível.

ESPIRAS DE COMPRESSÃO VARIÁVEL

O macrodesign do implante incorpora espiras de compressão variável que proporciona elevados níveis de estabilidade primária. Este perfil de rosca, diferente em cada tramo do implante, acomoda-se a cada zona do osso de acordo com suas características de densidade, otimizando e melhorando sua capacidade de receber cargas.

ÁPICE ESFÉRICO ATRAUMÁTICO

A forma esférica da área apical do implante protege as estruturas anatômicas de lesões.

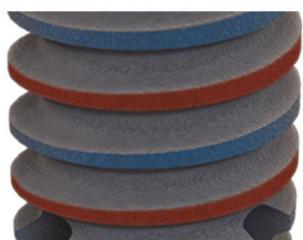

ROSCA DE PERFIL DUPLO

Facilita e encurta o tempo de inserção do implante reduzindo o aquecimento ósseo.



HELICAL ALVEOLI

Ajudam a colocação do implante, e aumentam a quantidade de tecido ósseo em contato íntimo com o implante.




TRANSPORTADOR E PARAFUSO DE FECHO INCLUIDOS

Triplo Narrow apresenta-se num envase duplo esterilizado, incluindo o transportador e o parafuso de fecho.


LA SUPERFICIE ECKCYTE®





Triplo® Triplo Perio é um implante de titânio altamente puro, com micro e nano rugosidade, graças aos mais modernos tratamentos de condicionamento ácido, com o resultado de uma ótima superfície para biocompatibilidade com osteócitos.

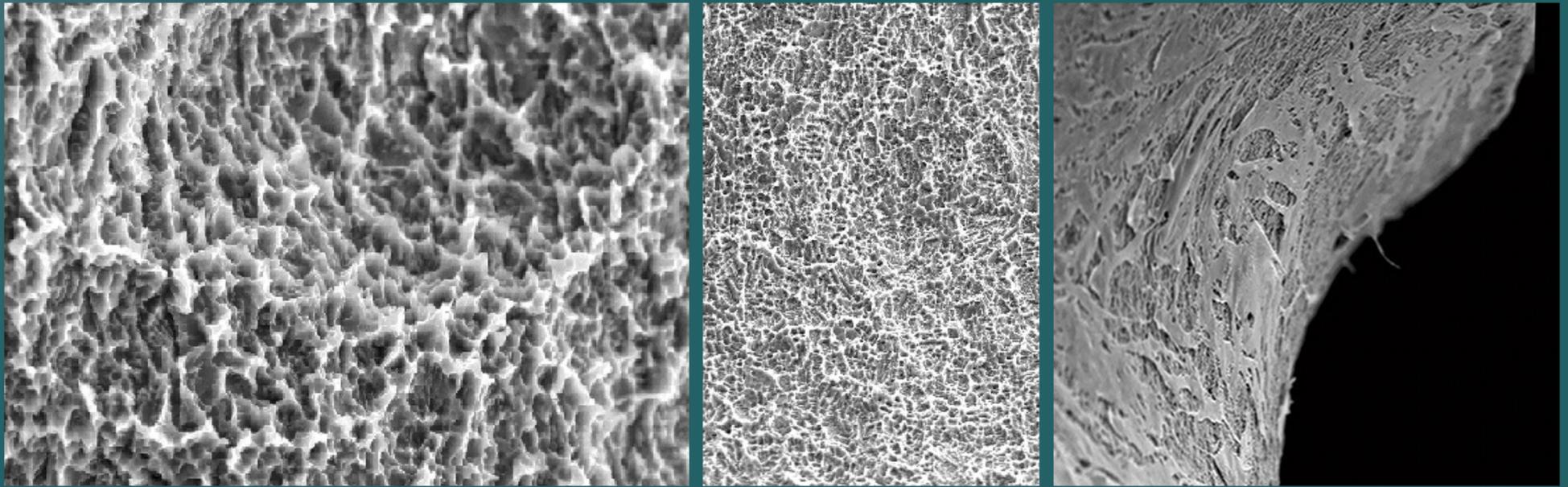

ECKCYTE® O EckCyte proporciona um aumento da superfície em contato com o osso que oferece uma matriz ideal graças a uma superfície rugosa muito homogênea e microporosa, que é um fator importante para a melhor proliferação osteoblástica do implante. (*)

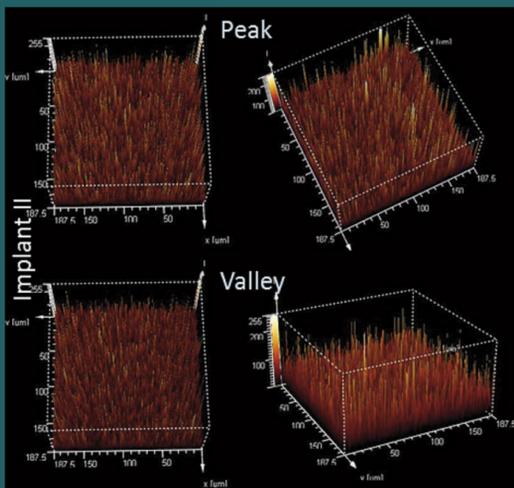

O tratamento de superfície proporciona uma proteção eficaz contra a corrosão e uma alta estabilidade, proporcionando também propriedades hidrofílicas que aceleram a adsorção de fluidos em toda a superfície do implante, melhorando assim a interação do meio biológico com o implante e sua capacidade de osteo-integração. (*)

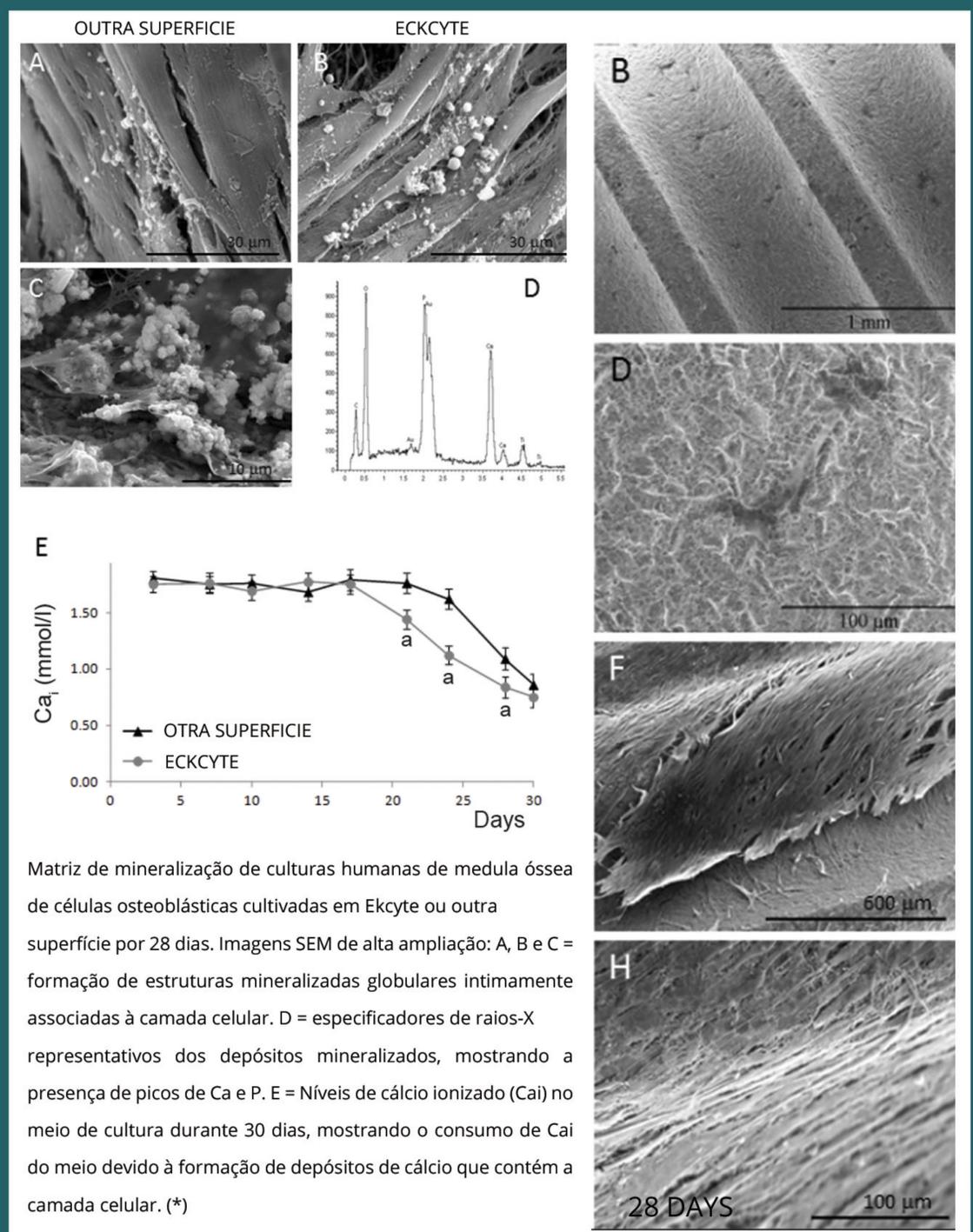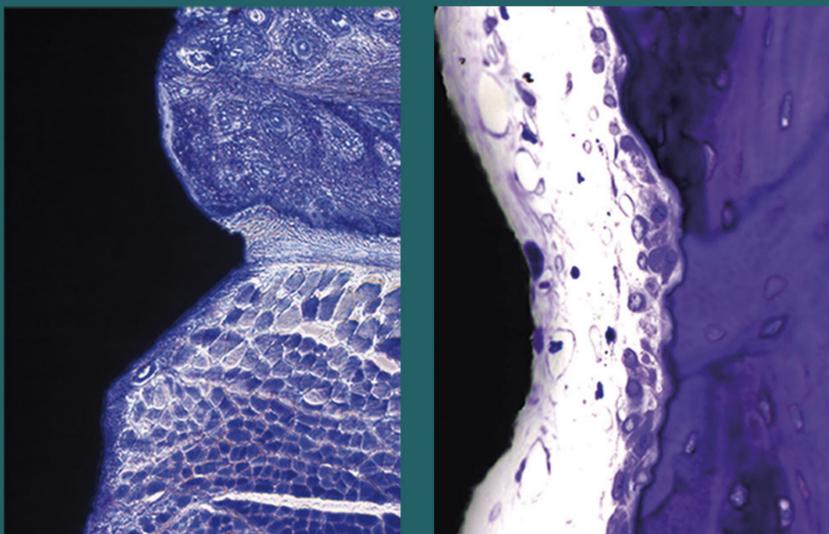


(*) Mesquita P, Gomes PD, Sampaio P, Juodzbalys G, Afonso A, Fernandes MH. Surface Properties and Osteoblastic Cytocompatibility of Two Blasted and Acid-Etched Titanium Implant Systems with Distinct Microtopography. J Oral Maxillofac Res 2012

A CONEXÃO "CONELOCK"



Os implantes Triplo Perio® integram a Exclusiva conexão CONELOCK da Eckermann, estudado e testado ao longo de mais de 15 anos, caracterizada pela sua precisão e estabilidade de acoplamento com os aditamentos protéticos que garante o êxito de qualquer solução protética, com ausência total de micromovimentos.

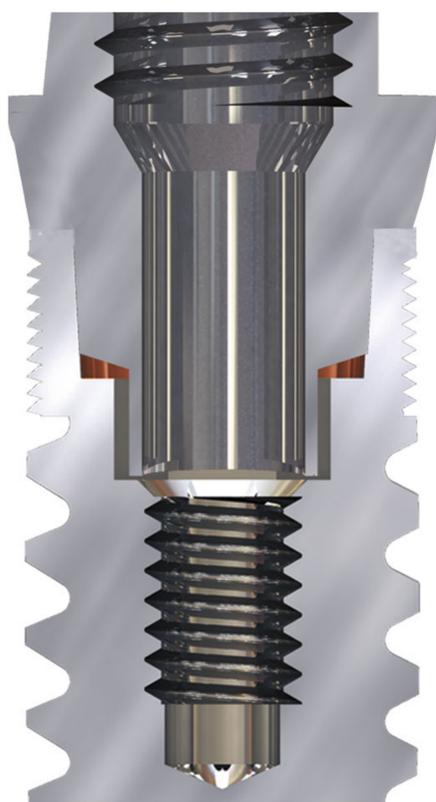

ESTABILIDADE, FIABILIDADE E ROBUSTEZ


A conexão protética singular de CONELOCK é uma de suas características diferenciais mais proeminentes e fornece grande confiança na estabilidade e na manutenção de reabilitações protéticas a longo prazo.

Graças à precisão desta conexão, o conjunto implante-pilar tem um comportamento monobloco muito robusto, como se não houvesse qualquer conexão. Na ausência de micromovimento, assegura-se uma união estável e fiável obtendo uma ótima transmissão das cargas oclusais sendo, portanto, o mais próximo ao comportamento do dente natural.

SELO BATERIOLÓGICO

A conexão de CONELOCK da Eckermann fornece um selo mecânico totalmente hermético, conseguindo um selo perfeito do implante-pilar que, como uma barreira, impeça infiltrações dos micro-organismos que podem causar o perimplantitis, a proliferação bacteriana e desagradáveis odores na boca do paciente.

Estudos universitários comprovaram um total estanque desta conexão protética, garantindo a ausência de infiltrações bacterianas.^(**)

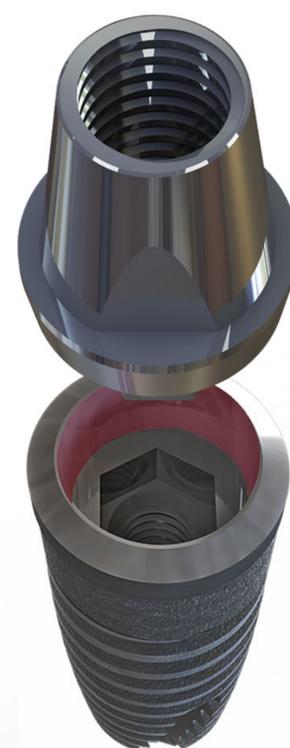

^(**) Estudo para avaliação de microfiltração e ajuste em um novo conceito de conexão de implante. /Ref. AB-15-DO-06. Dra. Mireia Pato; Dr. Luís Giner; Dr. Óscar Figueras. Universidade Internacional da Catalunha.

REVERSIBILIDADE

CONELOCK® fornece uma fixação perfeita do implante-pilar com um comportamento monobloco fiável e durável. No entanto, a concepção de sua geometria permite remover a prótese, se necessário, de forma simples e descomplicada, que abre uma nova porta para Soluções protéticas, além de uma economia considerável de tempo e custos.

EASY LINK & TRIPLO, UMA COMBINAÇÃO PERFEITA



O EASY LINK by Eckermann é um sistema de prótese fixa para o paciente e reversível para o clínico, que provou ser uma alternativa de fácil aplicação e que reúne todas as vantagens das próteses aparafusadas e cimentadas, eliminando as suas desvantagens.

A Easy Link aproveita os procedimentos tradicionais para a preparação de próteses dentárias e / ou novas tecnologias CAD-CAM que nos permitira obter todo o tipo de próteses utilizando materiais de última geração.

Este sistema de "retenção protética encapsulada" é uma patente espanhola Eckermann aplicável em próteses dentárias gerais e compatível com múltiplos sistemas de implantes dentários, capaz de eliminar chaminés, cimento e compensar as angulações.



TRIPLO PERIO

- Extraer el implante directamente del envase estéril, mediante la llave rosca implantes (para canaica) o para contra-ángulo.

- Colocación del implante en el alveolo, en modo enterrado como máximo, en la almohada elegida hasta el nivel de la interfase ósea del implante.
- Torque de inserción 70 Nm.

eckermann
DENTAL IMPLANT SYSTEM

ATENÇÃO AO CLIENTE

atencionalcliente@eckermann.es

+34 965 306 464

www.eckermann.es

C./ IRLANDA,2 03160 Almoradí - ALICANTE - ESPAÑA

