

 TRIPLO

eckermann
DENTAL IMPLANT SYSTEM

www.eckermann.es



L'IMPLANT DE CONNEXION INTERNE DE ECKERMANN



Un implant anatomique qui répond aux exigences actuelles: une conception robuste, moderne et facile à poser
Polyvalent au regard des options prothétiques permises il offre de plus un haut degré de sécurité, stabilité et simplicité.

Le design de Tripio permet le changement de plateforme, ce qui le rend idéal pour l'obtention d'un profil de l'émergence capable de limiter simultanément la résorption osseuse crétale.

MICROSPIRES


La zone cervicale de l'implant a été conçue avec des micro-filetages qui offrent une répartition optimale des charges fonctionnelles afin de préserver au maximum l'os marginal et de stimuler la calcification à ce niveau.

SPIRES À COMPRESSION VARIABLE

Le macrodesign de l'implant intègre des spires à compression osseuse variable qui offrent de hauts niveaux de stabilité primaire. Ce profil de filetage, différent selon la section de l'implant, s'adapte à chaque zone de l'os en fonction de ses caractéristiques de densité, optimisant et améliorant sa capacité à supporter des charges.

APEX ARRONDI ATRAUMATIQUE

La forme sphérique de la zone apicale de l'implant protège les structures anatomiques des blessures.

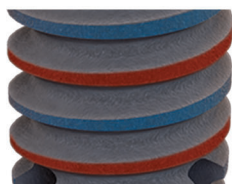

PROFIL À DOUBLE FILETAGE

Il facilite et raccourcit le temps d'insertion de l'implant, réduisant ainsi l'échauffement osseux.



ALVÉOLES HÉLICOÏDAUX

Ils facilitent la mise en place de l'implant et augmentent la quantité de tissu osseux en contact intime avec l'implant.




TRANSPORTEUR ET VIS CHIRURGICALE DE FERMETURE INCLUS

L'implant Tripio Narrow est conditionné sous double emballage stérile et inclut un transporteur et une vis de fermeture.


SUPERFICIE ECKCYTE®





Triplo® est un implant à la pointe de la technologie fabriqué à partir de titane de grande pureté et dont la surface dispose des caractéristiques optimales nécessaires à la biocompatibilité, grâce aux traitements de gravure à l'acide qui lui sont appliqués pour créer des micro et nano rugosités.

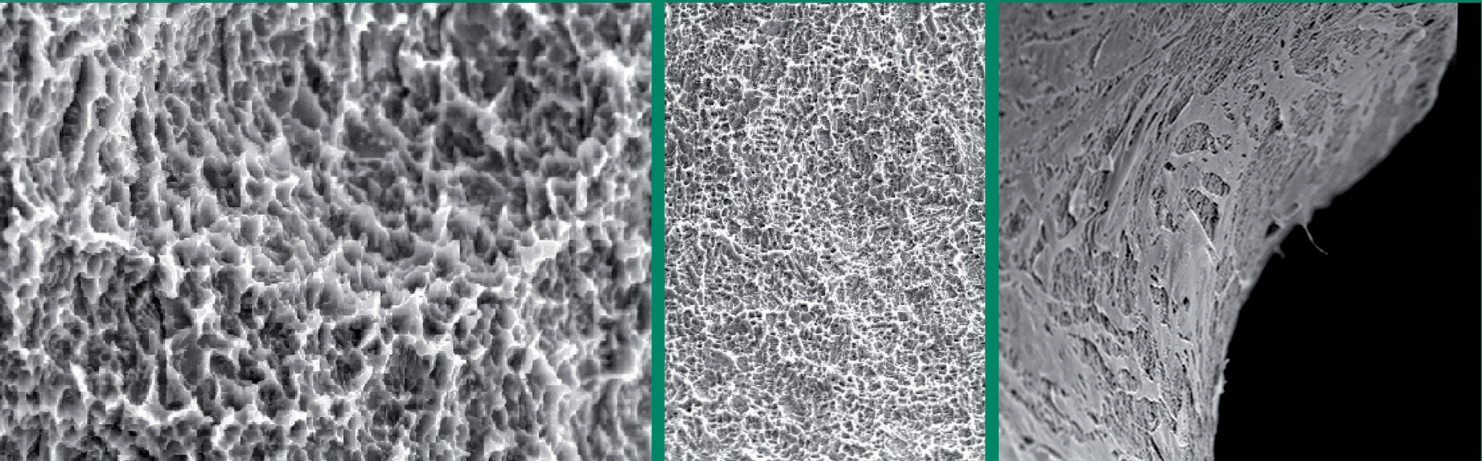

ECKCYTE® contribue à une augmentation de la surface en contact avec l'os et offre une matrice idéale grâce à sa surface rugueuse très homogène et microporeuse, ce qui contribue à une meilleure prolifération ostéoblastique et ostéointégration de l'implant. (*)

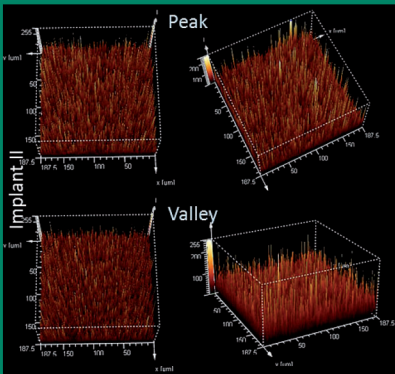


Le traitement de surface offre une protection efficace contre la corrosion et une grande stabilité, offrant également des propriétés hydrophiles qui accélèrent l'adsorption des fluides sur toute la surface de l'implant, améliorant ainsi l'interaction de l'environnement biologique et de l'implant et sa capacité d'ostéointégration. (*)

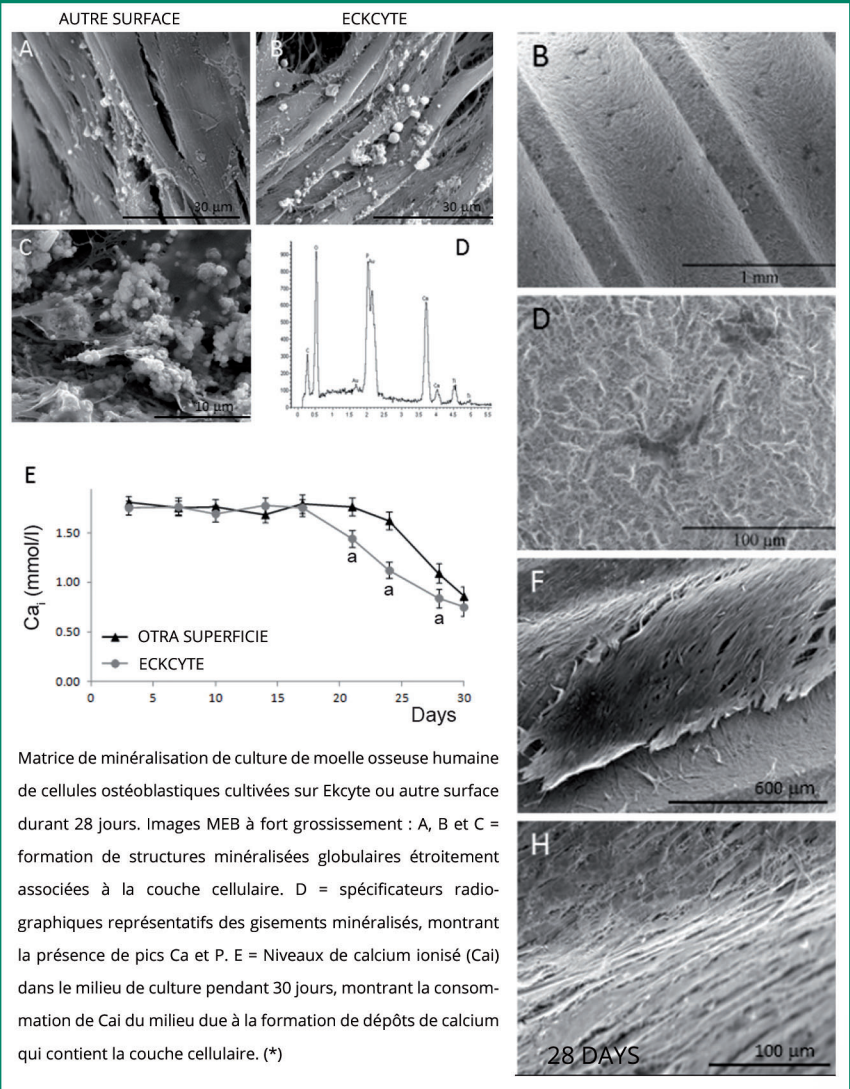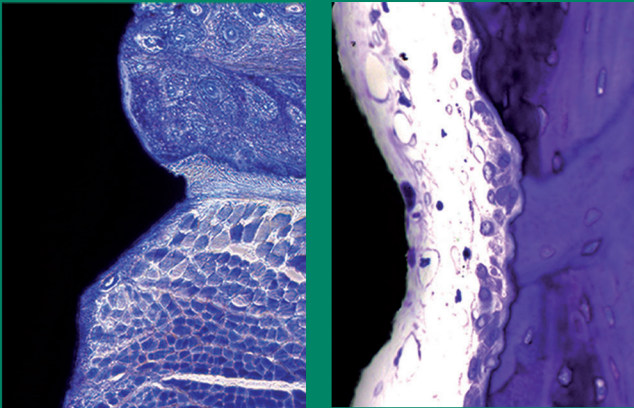

(*) Mesquita P, Gomes PD, Sampaio P, Juodzbalsys G, Afonso A, Fernandes MH. Surface Properties and Osteoblastic Cytocompatibility of Two Blasted and Acid-Etched Titanium Implant Systems with Distinct Microtopography. J Oral Maxillofac Res 2012 (Jan-Mar);3(1):e4 URL: <http://www.ejor.org/JOMR/archives/2012/1/e4/v3n1e4ht.pdf> doi: 10.5037/jomr.2012.3104

CONNEXION CONELOCK

Les implants Triplo® incorporent la connexion exclusive CONELOCK de Eckermann développée et testée depuis plus de 15 ans. La connexion se caractérise par sa précision et sa stabilité, en combinaison avec les attachements et garantit le succès de toute solution prothétique avec une absence totale de micromouvement.

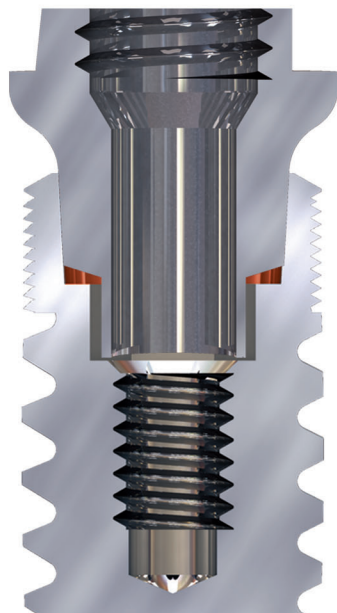

STABILITÉ, FIABILITÉ, ROBUSTESSE

La connexion exclusive CONELOCK est l'une de ses caractéristiques différentielles les plus remarquables et apporte une grande confiance dans la stabilité et le maintien à long terme des réhabilitations prothétiques sur ces implants.

Grâce à la précision de cette connexion, l'ensemble implant-pilier offre un comportement monobloc très robuste, comme si la connexion n'existait pas. En l'absence de micromouvement, l'union stable et fiable est assurée et la transmission des charges occlusales optimale. Par conséquent le comportement d'une dent naturelle est pratiquement reproduit.

SCELLAGE BACTÉRIOLOGIQUE

La connexion CONELOCK® d'Eckermann offre un scellage mécanique totalement hermétique, offrant une parfaite étanchéité implant-pilier qui, agissant comme une barrière, empêche toute filtration de micro-organismes susceptible de provoquer une périimplantite, une prolifération bactérienne et des odeurs désagréables dans la bouche du patient.

Des études universitaires ont démontré l'étanchéité totale de cette connexion prothétique, qui garantit l'absence de filtrations bactériennes. (**)



(**) Etude destinée à l'évaluation de la microfiltration et à l'ajustement dans un nouveau concept de connexion implantaire. / Réf AB-15-DO-06. Dra. Mireia Pato; Dr. Lluís Giner; Dr Oscar Figueras. Université internationale de Catalogne.

REVERSIBILITÉ

CONELOCK® offre une parfaite fixation implant-pilier avec un comportement monobloc fiable et durable, tout en permettant de retirer la prothèse, si nécessaire, sans complication, grâce à la conception de sa géométrie. Cela ouvre une nouvelle porte aux solutions prothétiques, en plus d'un considérable gain de temps et d'argent.

EASY LINK ET TRIPLO, UNE COMBINAISON PARFAITE

EASY LINK by Eckermann est un Système de prothèses fixes et réversibles qui a démontré être une alternative facile à poser et qui, de plus, permet réunir les avantages des prothèses, qu'elles soient vissées ou cimentées, tout en éliminant leurs inconvénients.

Easy Link se caractérise pour permettre le choix entre utiliser les procédés traditionnels de fabrication de prothèses dentaires et/ou les nouvelles technologies CAD-CAM qui permettent d'obtenir des prothèses extrêmement diverses en utilisant des matériaux de dernière génération.

Ce système de « rétention prothétique encapsulée » est un brevet original Eckermann, déposé en 2009, applicable aux prothèses dentaires générales.

Ce système exclusif permet d'éviter l'utilisation de cheminées comme celui du ciment et de compenser les angulations, devenant une solution prothétique fixe pour le patient et réversible pour le clinicien.



IMPLANTES

TRIPLO®

€€ 0051

Tapón de cierre incluido



- Ø 4,0 mm. REF.
 : 8,0 mm. IKTV 354008
 : 10,0 mm. IKTV 354010
 : 11,5 mm. IKTV 354011
 : 13,0 mm. IKTV 354013
 : 15,0 mm. IKTV 354015

- Ø 4,5 mm.
 : 6,0 mm. IKTV 354506
 : 8,0 mm. IKTV 354508
 : 10,0 mm. IKTV 354510
 : 11,5 mm. IKTV 354511
 : 13,0 mm. IKTV 354513
 : 15,0 mm. IKTV 354515

- Ø 5,0 mm.
 : 6,0 mm. IKTV 355006
 : 8,0 mm. IKTV 355008
 : 10,0 mm. IKTV 355010
 : 11,5 mm. IKTV 355011
 : 13,0 mm. IKTV 355013
 : 15,0 mm. IKTV 355015

INSTRUMENTAL

Caja Universal Box

€€ REF. CKSU



Caja Box Topes

€€ REF. CKST



Bisturi circular

€€ REF.
 Ø 4,0 mm. BC 40
 Ø 5,0 mm. BC 50
 Ø 6,0 mm. BC 60




Fresa lanceolada

€€ 0051 REF.
 larga FLM 200 K
 corta FLM 200 KC



Fresa helicoidal de acabado

€€ 0051 REF.
 Ø 2,5 mm. FSH 25 K
 Ø 3,0 mm. FSH 30 K
 Ø 3,5 mm. FSH 35 K
 Ø 4,0 mm. FSH 40 K
 Ø 4,5 mm. FSH 45 K
 Ø 5,0 mm. FSH 50 K

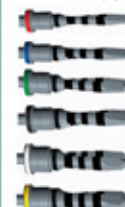

Fresa helicoidal de acabado corta

€€ 0051 REF.
 Ø 2,5 mm. FSH 25 K C
 Ø 3,0 mm. FSH 30 K C
 Ø 3,5 mm. FSH 35 K C
 Ø 4,0 mm. FSH 40 K C
 Ø 4,5 mm. FSH 45 K C
 Ø 5,0 mm. FSH 50 K C



Topes de fresado

€€ Ø 2,0, Ø 2,5, Ø 3,0 mm. REF.
 : 6,0 mm. T1 L6
 : 8,0 mm. T1 L8
 : 10,0 mm. T1 L10
 : 11,5 mm. T1 L11
 : 13,0 mm. T1 L13
 : 15,0 mm. T1 L15



€€ Ø 3,5, Ø 4,0 REF.
 : 6,0 mm. T2 L6
 : 8,0 mm. T2 L8
 : 10,0 mm. T2 L10
 : 11,5 mm. T2 L11
 : 13,0 mm. T2 L13
 : 15,0 mm. T2 L15



€€ Ø 4,5, Ø 5,0 REF.
 : 6,0 mm. T3 L6
 : 8,0 mm. T3 L8
 : 10,0 mm. T3 L10
 : 11,5 mm. T3 L11
 : 13,0 mm. T3 L13
 : 15,0 mm. T3 L15



Prolongador de fresa

€€ REF. EX 650




Paralelizador

€€ REF. PL 15



Iniciador de rosca

€€ REF.
 Ø 3,0 mm. MRS 3010 K
 Ø 3,5 mm. MRS 3510 K
 Ø 4,0 mm. MRS 4010 K
 Ø 4,5 mm. MRS 4510 K
 Ø 5,0 mm. MRS 5010 K

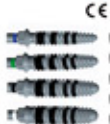

Llave rosca implantes universal

€€ REF.
 Para contra-ángulo LCT IH



€€ REF.
 Para carraca corta LHT 17
 larga LHT 23



Llave extractora pilares universal

€€ REF. LEP IKT 25



Carraca

€€ REF. CR



Carraca dinamométrica

€€ REF.
 35 Nw CRT 35



Destornillador hexagonal

€€ REF.
 corto DH 17
 largo DH 23



Llave portamechas universal

€€ REF. LMU



Mecha hexagonal

€€ REF. MHT



Instrumento portamechas

€€ REF. DM



CONFORMACIÓN DE TEJIDOS

Tornillo de cierre

€€ 0051 REF.
 : 2,0 mm. TC IKT L



Moldeador gingival

€€ 0051 REF.
 Ø 5,0 mm. MG 5015 IKT
 : 1,5 mm. MG 5530 IKT
 : 5,0 mm. MG 5550 IKT
 : 7,0 mm. MG 5570 IKT



TOMA DE IMPRESIÓN

Tránsfer impresión directa + tornillo

€€ REF.
 Ø 5,5 mm. TRT P



Tránsfer impresión indirecta + tornillo

€€ REF.
 Ø 5,5 mm. TRT A



Réplica implante

€€ REF.
 Ø 4,0 mm. RPT 40
 Ø 4,5 mm. RPT 45
 Ø 5,0 mm. RPT 50



Réplica pilar macizo

€€ REF.
 11,5 mm. RP PM 15
 14,0 mm. RP PM 40



PRÓTESIS

Tornillo oclusal

€€ 0051 REF.
 MultiCone macizo THX 1813
 THX PTC



Tornillo de asiento

€€ 0051 REF.
 : 1,5 mm. TCM 15 IKT
 : 4,0 mm. TCM 40 IKT
 : 6,0 mm. TCM 60 IKT



Pilar mecanizado ConeLock

€€ 0051 REF.
 Ø 5,0 mm. PM 1516 IKT
 MultiCone 1,5 PM 4516 IKT
 : 4,0 mm. PM 6516 IKT
 : 6,0 mm. PM 9516 IKT
 : 9,0 mm. PM 9516 IKT



€€ REF.
 Ø 5,0 mm. PM 4525 IKT
 : 4,0 mm. PM 6525 IKT
 : 6,0 mm. PM 6525 IKT



Pilar mecanizado macizo

€€ REF.
 Ø 5,0 mm. PTC 5016 IKT
 MultiCone 1,5 PM 5040 IKT
 : 4,0 mm. PM 5060 IKT
 : 6,0 mm. PM 5060 IKT
 : 9,0 mm. PM 7616 IKT



€€ REF.
 Ø 5,0 mm. PM 5040 IKT
 : 4,0 mm. PM 5060 IKT
 : 6,0 mm. PM 5060 IKT
 : 9,0 mm. PTC 5030 IKT



Pilar angulado

€€ 0051 REF.
 Ø 5,0 mm. PMA 20 IKT
 : 1,5 mm. PMA 20B IKT



Pilar mecanizado INTERFASE

€€ 0051 REF.
 Ø 5,0 mm. PI 4516 IKT
 : 4,0 mm. PI 4516 IKT



Pilar sobrecolable CrCo

€€ 0051 REF.
 Ø 5,0 mm. PSC IKT A



Asiento calcinable

€€ REF. AC



Pilar calcinable

€€ REF.
 ANTIGIRO CA IKT50 A
 CIRCULAR CA IKT50 C



Cofia calcinable

€€ REF.
 : 1,5 mm. CA PM 15
 : 4,0 mm. CA PM 40
 : 4,0 mm. CA PM 40 A
 : 6,0 mm. CA PM



Tornillo guía (macizo)

€€ REF.
 Standard TGX
 Multi-Cone TGX PTC



Anillo metálico

€€ 0051 REF. AM



Cofia metálica

€€ 0051 REF.
 Ø 5,5 mm. CM PM 40
 : 4,0 mm. CM PM 40
 : 6,0 mm. CM PM



Pilar LOCATOR®

€€ 0051 REF.
 Ø 4,1 mm. PL IKT 04
 : 0,4 mm. PL IKT 10
 : 1 mm. PL IKT 20
 : 2 mm. PL IKT 30
 : 3 mm. PL IKT 40
 : 4 mm. PL IKT 40



Pack de proceso LOCATOR®

€€ 0051 REF. EX 8519



Botón nylon LOCATOR®

€€ 0051 REF.
 Ret. Fuerte 2 pcs EX 8524-2
 Ret. Media 2 pcs EX 8527-2
 Ret. Ligera 2 pcs EX 8529-2
 Angulados 2 pcs EX 8547-2



Herramienta básica LOCATOR®

€€ Comercializado por Eickermann
 REF. EX 8393



Tránsfer LOCATOR®

€€ REF. EX 8505



Réplica LOCATOR®

€€ REF. EX 8530



Convertidores de conexión

€€ 0051 REF.
 A HEXAGONO C27 IKT IH
 : 2,7 mm. C42 IKT IH
 : 4,2 mm. C27 IKT IS
 : 4,2 mm. C42 IKT IS



Pilar cónico recto

€€ 0051 REF.
 PMMU 1 IKT
 PMMU 2 IKT
 PMMU 3 IKT
 PMMU 4 IKT
 PMMU 5 IKT
 PMMU 6 IKT
 PMMU 7 IKT



Pilar cónico angulado

€€ 0051 REF.
 PMMU A 17 2 IKT
 PMMU A 17 3 IKT
 PMMU A 30 3 IKT
 PMMU A 30 4 IKT



PRÓTESIS EASY LINK® Consultar catálogo Easy Link



El eje es un eje de dirección para el eje exterior, que se llama rosca implante en la parte superior y en la parte inferior.

El eje es un eje de dirección para el eje exterior, que se llama rosca implante en la parte superior y en la parte inferior. El eje es un eje de dirección para el eje exterior, que se llama rosca implante en la parte superior y en la parte inferior.

eckermann
DENTAL IMPLANT SYSTEM

ATENCIÓN AL CLIENTE

atencionalcliente@eckermann.es

+34 965 306 464

www.eckermann.es

C./ IRLANDA,2 03160 Almoradí - ALICANTE - ESPAÑA

