



TRIPLO



eckermann
DENTAL IMPLANT SYSTEM

www.eckermann.es



O IMPLANTE DE CONEXÃO INTERNA DA ECKERMANN



Um implante anatômico que responde às exigências atuais: um design robusto, avançado e de fácil aplicação, muito versátil nas propostas protéticas e que atinge os níveis máximos de segurança, estabilidade e simplicidade.

O design do Triplo permite a mudança da plataforma, pelo que é a opção idónea para obter um ótimo perfil de emergência, limitando ao mesmo tempo a reabsorção óssea crestal.

MICROESPIRAS



A área cervical do implante foi projetada com microespiras que fornecem uma distribuição ótima das cargas funcionais com o objetivo de preservar máximo o osso marginal e estimular a calcificação a esse nível.

ESPIRAS DE COMPRESSÃO VARIÁVEL

O macro design do implante integra espiras de compressão variáveis que proporcionam um altíssimos níveis de estabilidade primária. Este perfil de rosca, diferente em cada tramo do implante, acomoda-se a cada zona do osso de acordo com as suas características de densidade, otimizando e melhorando a sua capacidade de receber cargas.

ÁPICE ESFÉRICO ATRAUMÁTICO

La forma esférica de la zona apical del implante protege las estructuras anatómicas de lesiones.

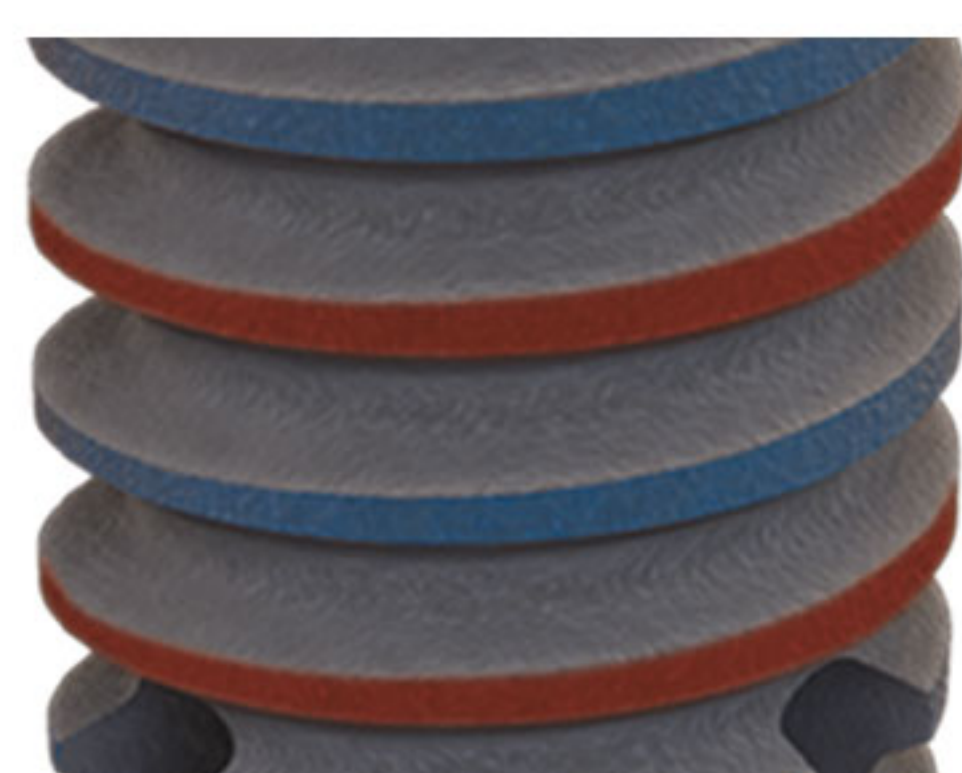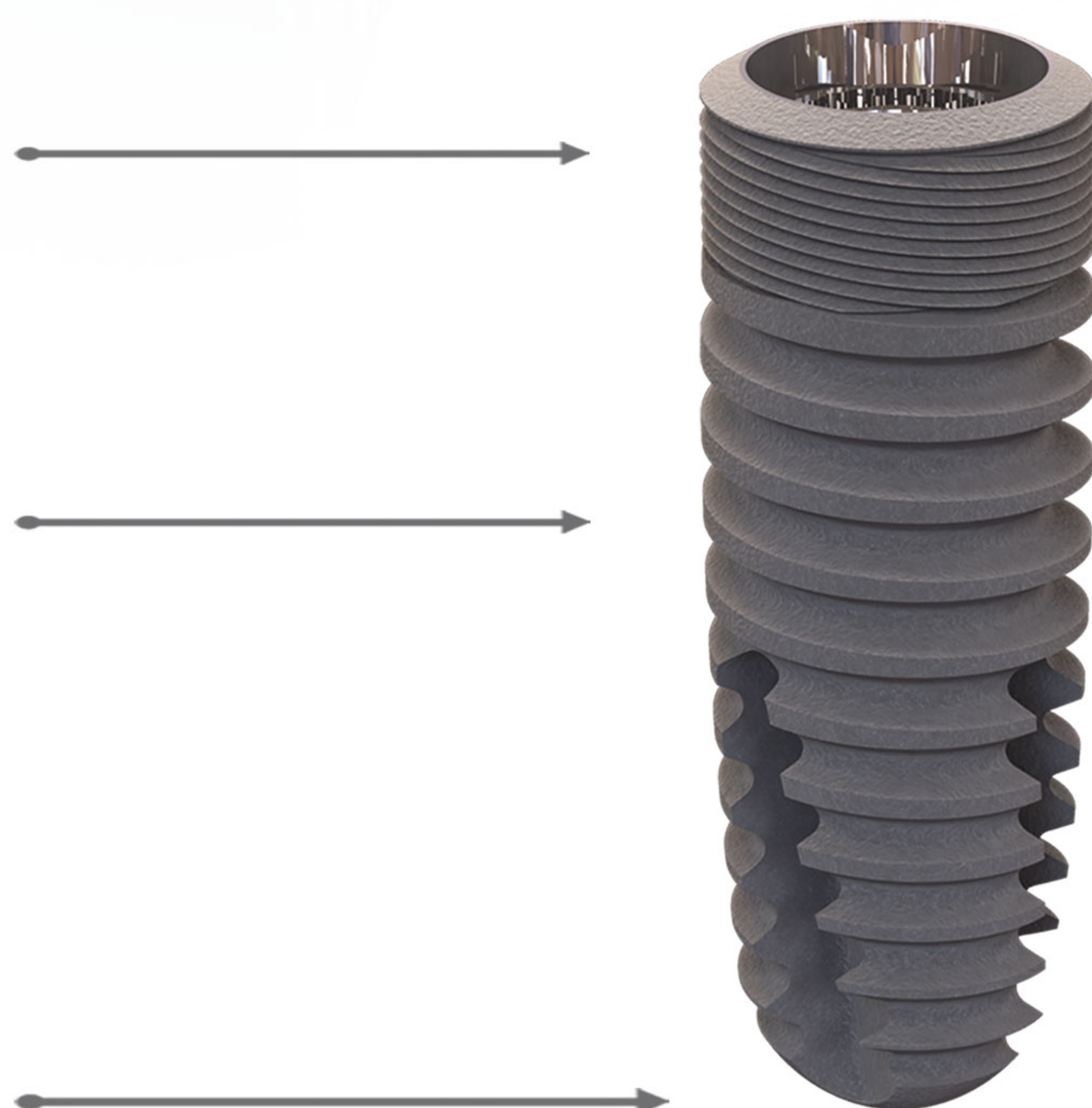

ROSCA DE PERFIL DUPLO

Facilita e encurta o tempo de inserção do implante reduzindo o aquecimento ósseo.



ALVÉOLOS HELICOIDAIS

Ajudam a colocação do implante, e aumentam a quantidade de tecido ósseo em contato íntimo com o implante.




TRANSPORTADOR E PARAFUSO DE FECHO INCLUÍDO

O implante Triplo apresenta-se numa embalagem dupla esterilizada e inclui um transportador e um parafuso de fecho.


LA SUPERFICIE ECKCYTE®





Triplo® Triplo é um implante de última geração de titânio altamente puro, com micro e nano rugosidade, graças aos mais modernos tratamentos de ataque ácido, resultando numa superfície ideal para biocompatibilidade com osteócitos.

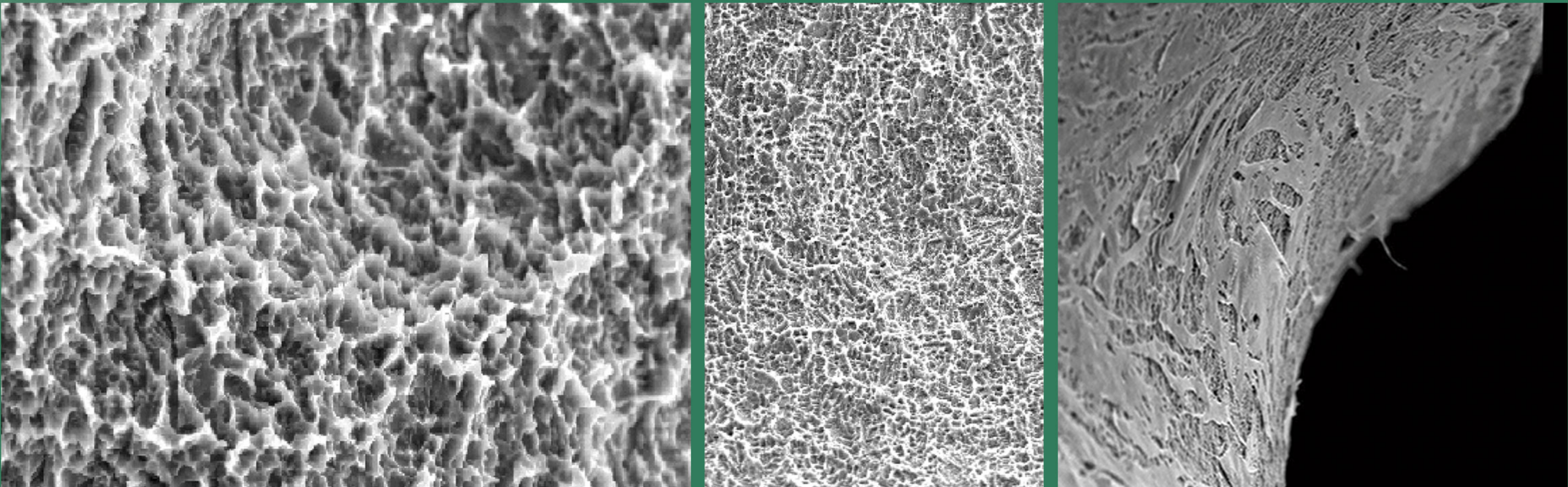

ECKCYTE® Proporciona um aumento da superfície em contacto com o osso oferecendo uma matriz ideal graças a uma superfície rugosa muito homogeneia e microporosa, que constitui um fator importante para uma melhor proliferação osteoblástica e a osteointegração do implante.^(*)

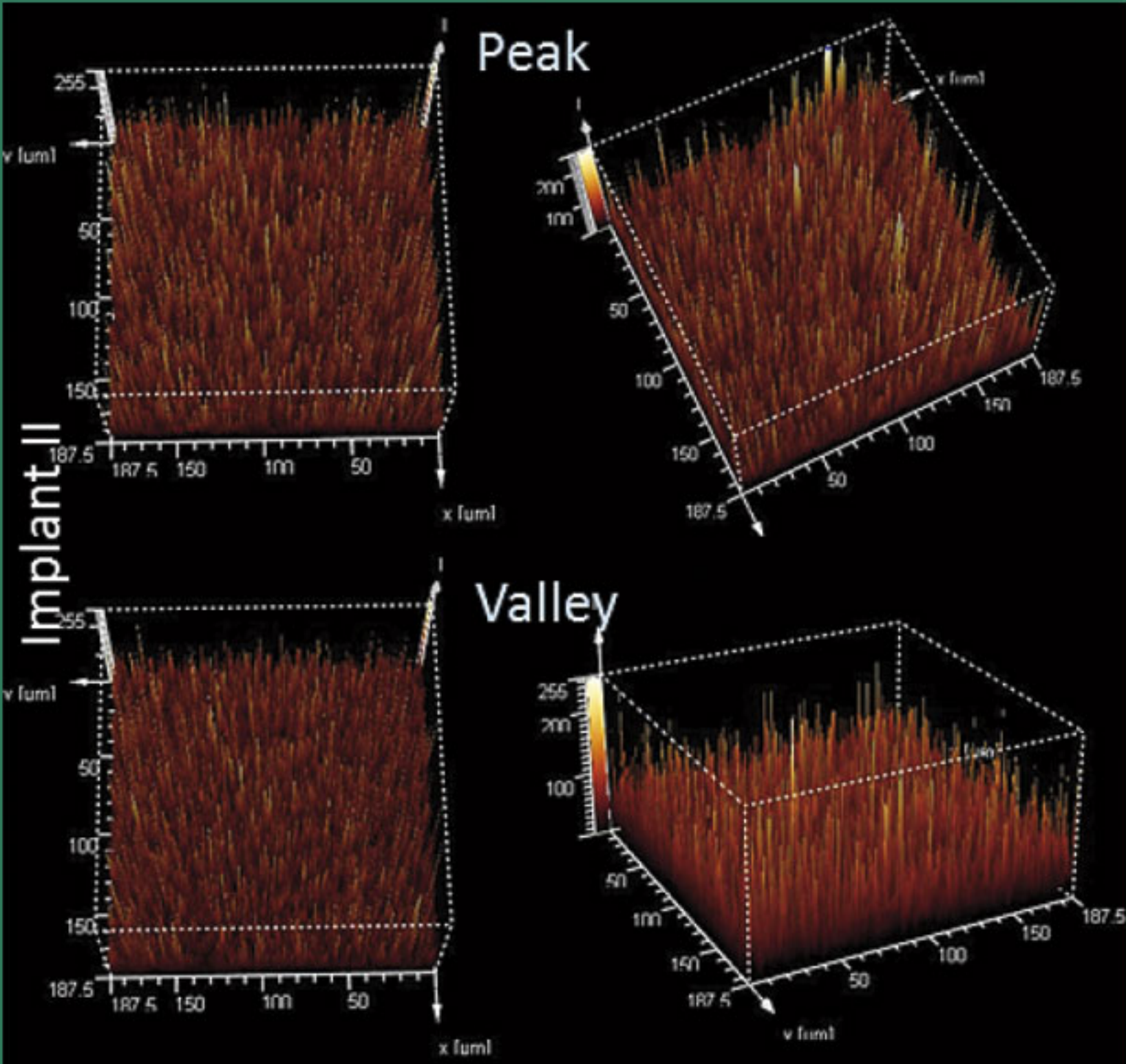


O tratamento de superfície proporciona uma proteção eficaz contra a corrosão e uma alta estabilidade, proporcionando também propriedades hidrofílicas que aceleram a adsorção de fluidos em toda a superfície do implante, melhorando assim a interação do meio biológico com o implante e sua capacidade de osteo-integração.^(*)

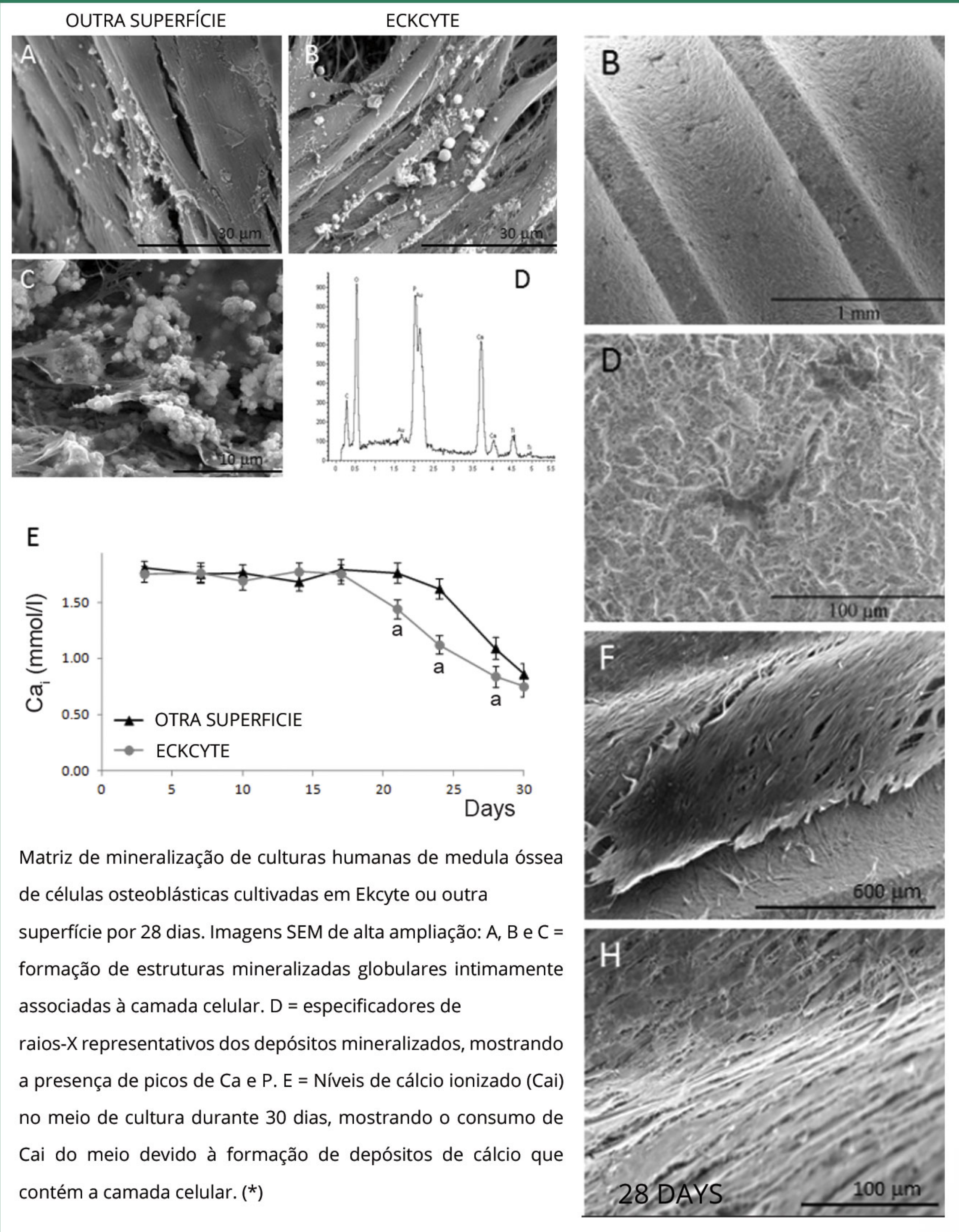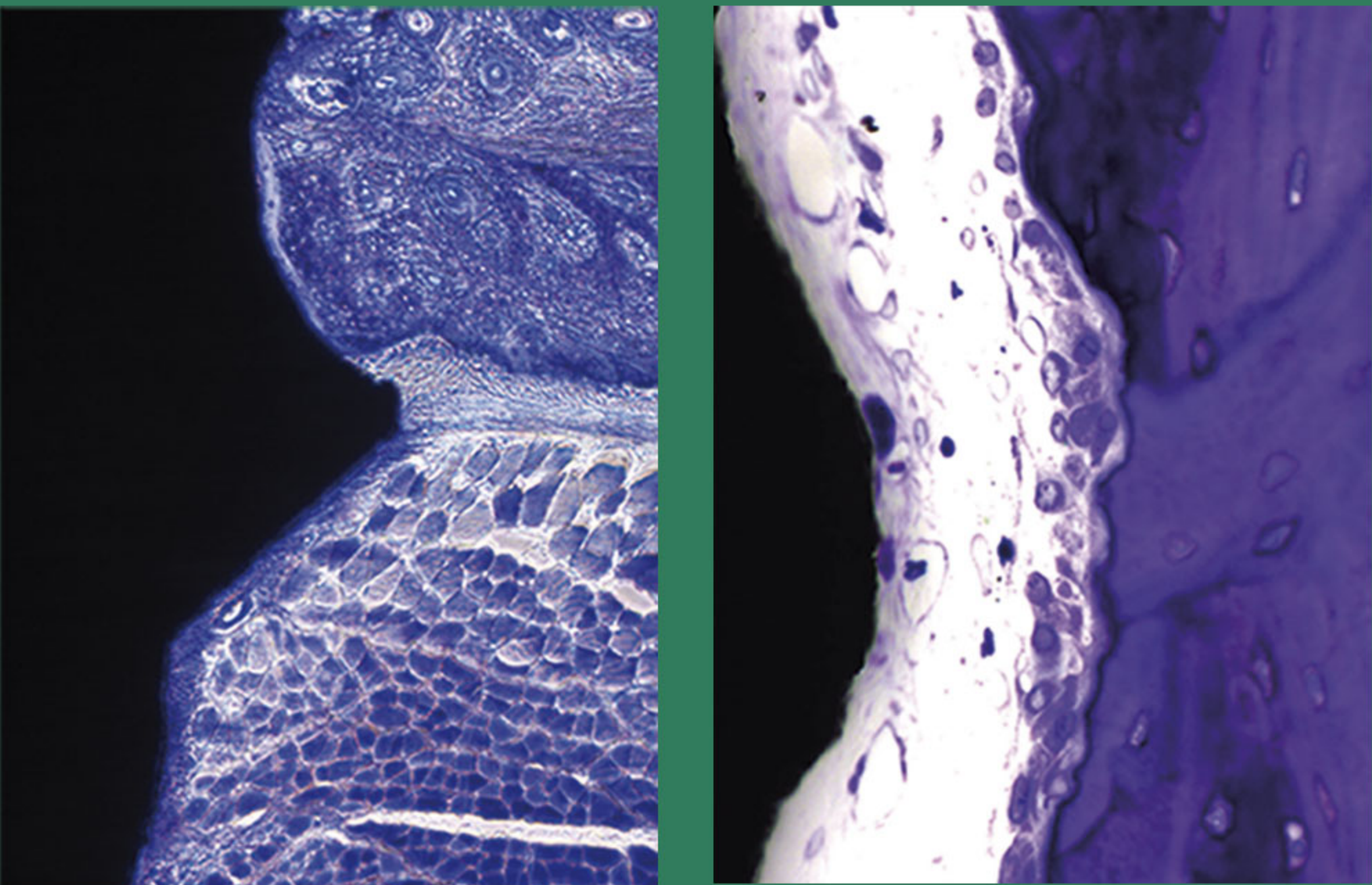

(*) Mesquita P, Gomes PD, Sampaio P, Juodzbalsys G, Afonso A, Fernandes MH. Surface Properties and Osteoblastic Cytocompatibility of Two Blasted and Acid-Etched Titanium Implant Systems with Distinct Microtopography. J Oral Maxillofac Res 2012 (Jan-Mar);3(1):e4 URL: <http://www.ejor.org/JOMR/archives/2012/1/e4/v3n1e4ht.pdf> doi: 10.5037/jomr.2012.3104.

A CONEXÃO CONELOCK

Os implantes Triplo® integram a exclusiva conexão CONELOCK da Eckermann, estudado e testado ao longo de mais de 15 anos, caracterizada pela sua precisão e estabilidade de acoplamento com os aditamentos protéticos que garante o êxito de qualquer solução protética, com ausência total de micromovimentos.

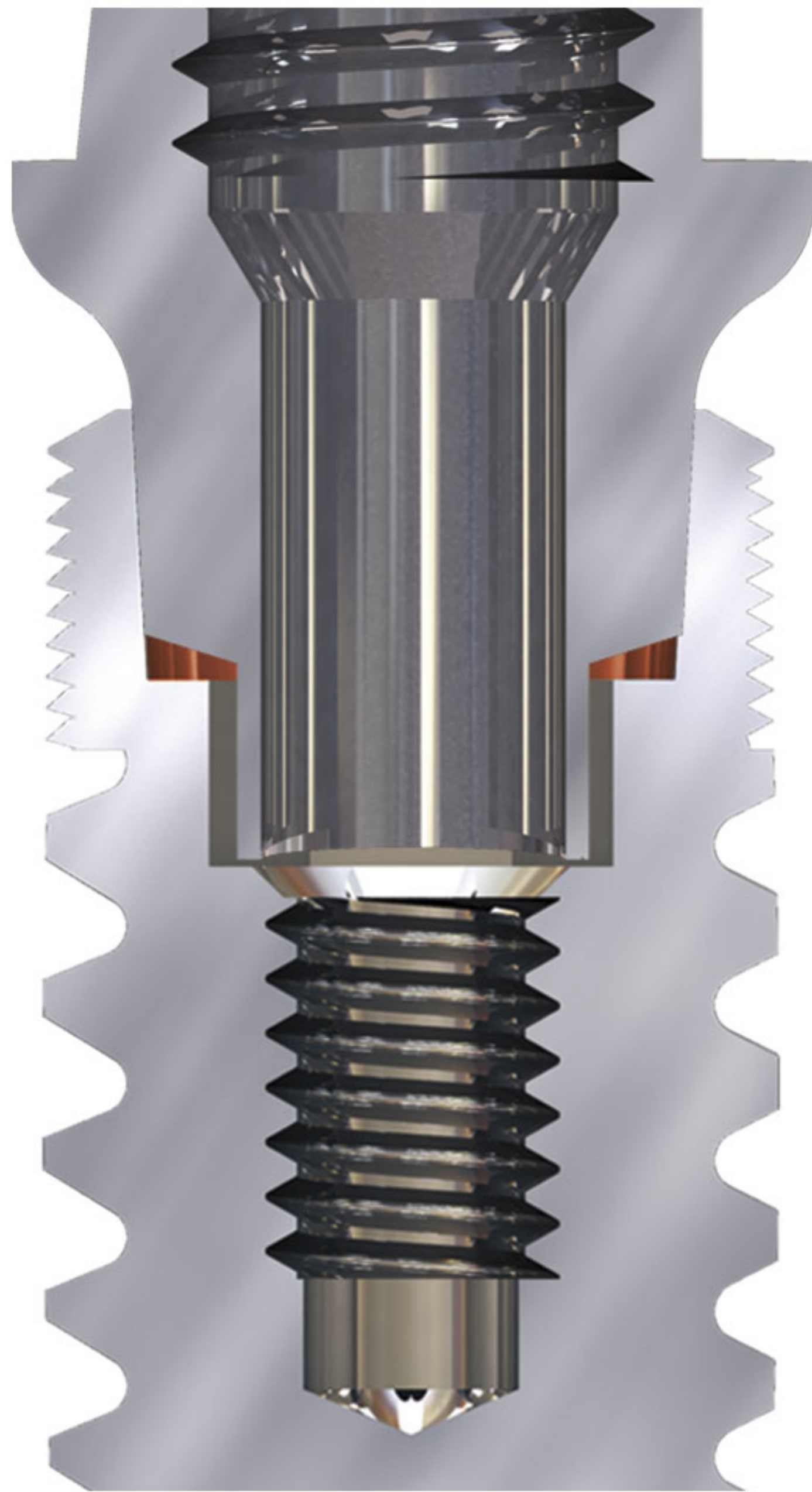

ESTABILIDADE, FIABILIDADE E ROBUSTEZ

A conexão protética singular de CONELOCK é uma de suas características diferenciais mais proeminentes e fornece grande confiança na estabilidade e na manutenção de reabilitações protéticas a longo prazo.

Graças à precisão desta conexão, o conjunto implante-pilar tem um comportamento monobloco muito robusto, como se não houvesse qualquer conexão. Na ausência de micromovimento, assegura-se uma união estável e fiável obtendo uma ótima transmissão das cargas oclusais sendo, portanto, o mais próximo ao comportamento do dente natural.

SELO BATERIOLÓGICO

LA conexão de CONELOCK da Eckermann fornece um selo mecânico totalmente hermético, conseguindo um selo perfeito do implante-pilar que, como uma barreira, impeça infiltrações dos micro-organismos que podem causar o perimplantitis, a proliferação bacteriana e desagradáveis odores na boca do paciente.

Estudos universitários comprovaram um total estanque desta conexão protética, garantindo a ausência de infiltrações bacterianas.^(**)



^(**) Estudo para avaliação de microfiltração e ajuste em um novo conceito de conexão de implante. /Ref. AB-15-DO-06. Dra. Mireia pato; Dr. Luís Giner; Dr. Óscar Figueras. Universidade Internacional da Catalunha.

REVERSIBILIDADE

CONELOCK® fornece uma fixação perfeita do implante-pilar com um comportamento monobloco fiável e durável. No entanto, a conceção de sua geometria permite remover a prótese, se necessário, de forma simples e descomplicada, que abre uma nova porta para Soluções protéticas, além de uma economia considerável de tempo e custos.

EASY LINK & TRIPLO, UMA COMBINAÇÃO PERFEITA



O EASY LINK by Eckermann é um sistema de prótese fixa para o paciente e reversível para o clínico, que provou ser uma alternativa de fácil aplicação e que reúne todas as vantagens das próteses aparafusadas e cimentadas, eliminando as suas desvantagens.

A Easy Link aproveita os procedimentos tradicionais para a preparação de próteses dentárias e / ou novas tecnologias CAD-CAM que nos permitira obter todo o tipo de próteses utilizando materiais de última geração.

Este sistema de "retenção protética encapsulada" é uma patente espanhola Eckermann aplicável em próteses dentárias gerais e compatível com múltiplos sistemas de implantes dentários, capaz de eliminar chaminés, cimento e compensar as angulações.



TRIPLO

• Estados: implante directamente en un hueso
estéril mediante la llave rosca implantada que
permite un control angular.

• Puede ser de implante o de abalorio
intermedio con la llave
rosca de tipo "bush" o
"intermedio" de la llave rosca.

eckermann
DENTAL IMPLANT SYSTEM

ATENÇÃO AO CLIENTE

atencionalcliente@eckermann.es

+34 965 306 464

www.eckermann.es

C./ IRLANDA,2 03160 Almoradí - ALICANTE - ESPAÑA

